


# Hurtigguide MEMOmessenger



ABILIA

## Slik legger man inn en ny melding:

Trykk og hold inn knappen på venstre side i 3 sekunder.

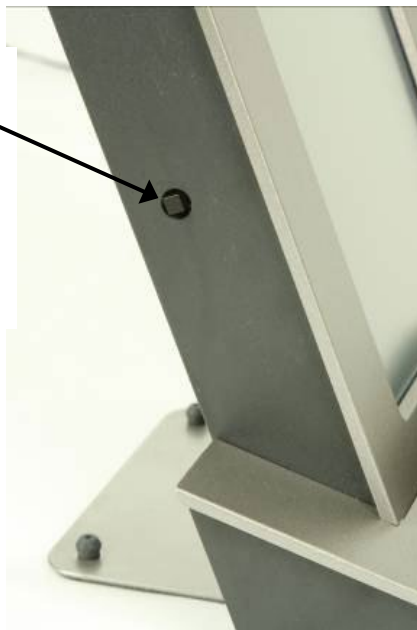

Nå vises et bilde der man skal velge hvilken type melding som skal legges inn.



For meldinger som skal komme en gang og ikke mer



For meldinger som skal gjentas en eller flere ganger i uken

For meldinger som skal gjentas på en bestemt dato hver måned



For meldinger som skal gjentas en gang i året, f.eks bursdager

- Velg type melding:

The image shows four screenshots of a blue interface for setting an alarm. Each screen has a title 'SETT' and a subtitle for the message type. The first screen, 'ENKEL MELDING', shows a time of 10:57, date TIRSDAG 22 APRIL 2008, and options for MASING 1 MIN and VEKKING 3 MIN. The second screen, 'UKENTLIG MELDING', shows a time of 10:59 and options for days of the week (M, T, O, T, F, L, S, ALLE) and alarm types. The third screen, 'MÅNEDLIG MELDING', shows a time of 11:00 and date DAG 22. The fourth screen, 'ÅRLIG MELDING', shows a time of 11:00 and date 22 APRIL. All screens have a 'TIDSBEGRENSNING AV' section and an 'AVBRYT' button.

- Velg tid for alarmen ved å trykke på trekantene ◀ ▶ på hver side av klokkeslettet.
- Velg dag ved å trykke på trekantene ◀ ▶ eller huke av for ☑ aktuelle dager.
- Velg om meldingen skal have MASING eller VEKKING.
- Trykk på mikrofonen  for å lese inn en melding.
- Trykk på den store sirkelen  og les inn meldingen:



- Trykk på  for å høre på meldingen.
- Om meldingen ble bra, trykk på LAGRE. Om den ikke ble bra, trykk på  for å spille inn på nytt.
- Trykk på AVSLUTT.

## Slik gjør man innstillinger:

Trykk og hold inn knappen på venstre side i 6 sekunder.



Nå vises et bilde der man kan gjøre ulike typer innstillinger:



For å stille inn dato og tid

For å stille inn hvor klokken skal vises på skjermen og hva som skal sies

For å stille inn tidsperioder for morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway  
Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

