

Kom godt fra start med



**ASK-software til
kommunikation med
symboler og tekst**

Udarbejdet af
Smartbox

Sikker brug af Grid

Brug af Grid i et medicinsk miljø

Grid må ikke være brugerens eneste metode til at foretage et nødopkald eller en alarm.

Grid er ikke beregnet til at foretage en medicinsk vurdering af en bruger.

thinksmartbox.com/safety

Grid og dine data

Grid 3 gemmer ikke brugerdata online uden din tilladelse. Alle data vedrørende dine sociale konti og e-mailkonti gemmes lokalt og deles aldrig.

Når du opretter en konto i Grid 3, får du vist flere indstillinger til beskyttelse af personoplysninger. Med din tilladelse kan Grid 3 optage chat-historik og bruge placeringsdata til at forbedre forudsigelse over tid. Disse data gemmes altid lokalt og sendes ikke til Smartbox.

thinksmartbox.com/privacy

Hvem er Grid til?

ASK-brugere



- Kommunikation
- Tilgængelighedsapps
- Alternativ betjening af anden software
- Styring af andre enheder i dit hjem

Support til ASK-brugere



- Ændre indstillinger
- Oprette Grid-brugerprofiler
- Tilføje Grid Layouts
- Redigere eller oprette Grid Layouts
- Fjernredigering

Grid 3 er software til Windows-enheder

Det er vigtigt, at du læser brugervejledningen og sætter dig ind i brugen af din enhed samt Windows-operativsystemet.

Kom godt fra start første gang



Vælg Grid-ikonet på skrivebordet for at starte



Vælg din stemme



Opret en brugerprofil



Opret din Smartbox-konto for at bruge fjernredigering m.m.



Opret forbindelse til Dropbox for at sikkerhedskopiere



Vælg dine Grid Layouts



Konfigurer din
betjeningsmetode og
dine personlige konti



E-mail



Telefon

"Hello!"

Åbn dit Grid Layout
til kommunikation, og
begynd at tale!



Betjen andre apps
på din enhed



Udforsk og lær



... og meget mere!


Få mere at vide

I denne vejledning finder du de grundlæggende oplysninger om, hvordan du kommer godt fra start med Grid. Du kan få mere at vide på vores websted på thinksmartbox.com



Få mere at vide om, hvordan du redigerer og tilpasser dit indhold

Avanceret redigering og funktioner

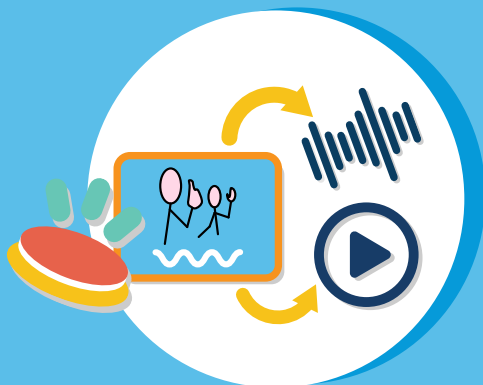

Tilpasning af alternativ betjening og andre indstillinger

thinksmartbox.com/learn-at-home



Vejledninger og ressourcer til Grid Layouts

Vi har forskellige vejledninger og ressourcer, der kan hjælpe dig med at lære og udforske vores Grid Layouts.

thinksmartbox.com/learning-resources

Webinarer og selvstudier

Vi tilbyder flere webinarer i løbet af året. Du kan også holde dig opdateret på vores YouTube-kanal og se korte videoer.

thinksmartbox.com/youtube



Kom med i fællesskabet

Et sted, hvor Grid-brugere, talepædagoger og andet fagpersonale samt familier deler ideer, stiller spørgsmål og støtter hinanden.

thinksmartbox.com/facebook



Introduktion til Grid

1.	Hvad er ASK?	10
2.	Lær Grid at kende	12
3.	Velkommen til Grid Explorer	14
4.	Menuen Grid Explorer	16
5.	Betjeningsindstillinger i Grid	17
6.	Vælg din stemme	19

Grid sets

7.	Grid sets	20
8.	Vælg dine første Grid Layouts	22
9.	Medfølgende Grid Layouts	24
10.	Tilføj flere Grid Layouts	26
11.	Alternative versioner af Grid Layouts	27
12.	Online Grid Layouts	28
13.	Menuen Grid Layouts	30
14.	Brug af et Grid Layout til symbolkommunikation	32
15.	Brug af et Grid Layout til tekstkommunikation	34
16.	Deling af dine Grid Layouts	36

Gør mere med Grid

17.	Indstillinger	38
18.	Brugerprofiler	40
19.	Sikkerhedskopiering af din brugerprofil	41
20.	Redigeringstilstand	42
21.	Fjernredigering	44
22.	Opdater Grid	46

Få hjælp

23.	Support	47
24.	Sikkerhed	48
25.	Systemkrav	50

1

Hvad er ASK?

ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikation. Mange bruger ASK til at hjælpe dem med at kommunikere, når de har lidt eller ingen tale.


ASK findes i mange former og udgaver, hvor du kan bruge symboler eller tekst til at vælge, hvad du vil sige. ASK-løsninger spænder fra ikke tekniske metoder, hvor man bruger kort og bøger, til højteknologiske kommunikationshjælpemidler, f.eks. Grid Pad.

Brug af Grid som en del af ASK


Grid understøtter en lang række behov lige fra at forbedre det talte sprog ved hjælp af et forskningsbaseret ordforråd som Super Core til hurtig sætningsbygning med et lettilgængeligt teksttastatur.

Vælg og tilpas mange forskellige stemmer og ordforråd for at sige, hvad du vil sige, præcis på den måde, du ønsker at sige det.



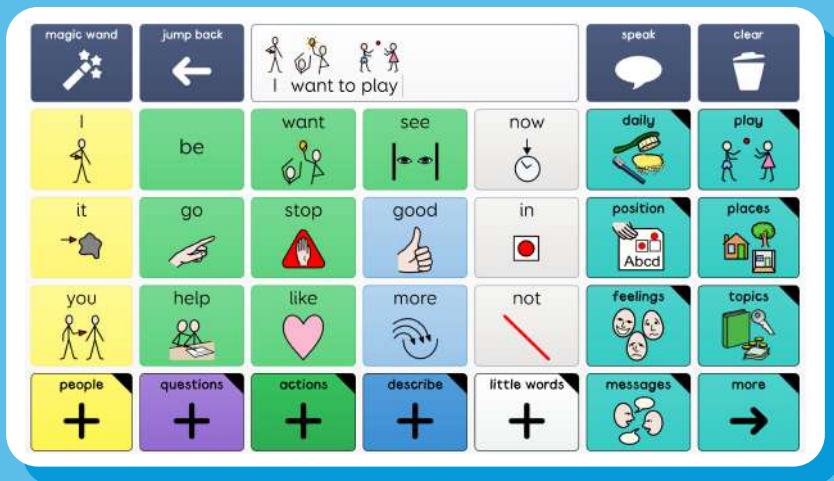

Super Core er et af Grid Layoutene til symbolkommunikation, som findes i Grid

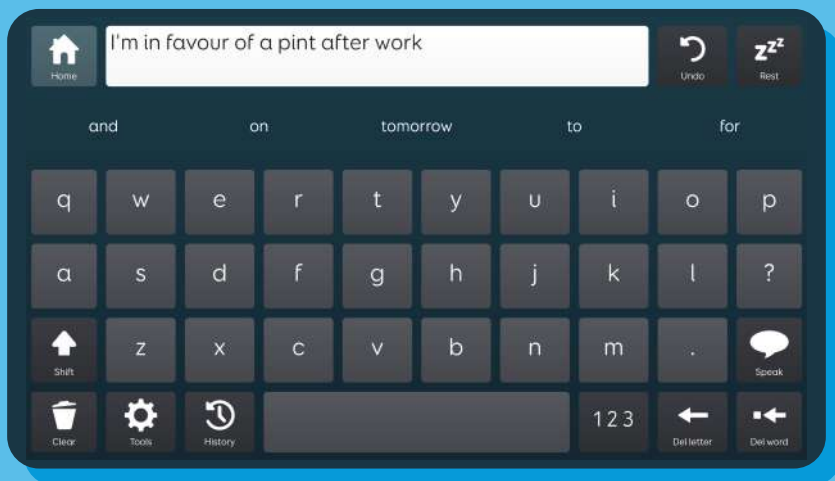

Fast Talker er et tekstbaseret Grid Layout med en masse værktøjer til hurtig skrivning af meddelelser



Brugerprofiler

I din brugerprofil gemmes alle dine Grid Layouts, præferencer og andre indstillinger.



Grid Explorer

Grid Explorer er din startskærm – og det er her, du finder dine Grid Layouts.



Grid Layouts

Et Grid Layout er en app i Grid. Det er dine ressourcer til kommunikation og meget mere.




Redigeringstilstand

Hvert Grid Layout kan tilpasses og redigeres – eller du kan oprette et Grid Layout fra bunden.


3

Velkommen til Grid Explorer

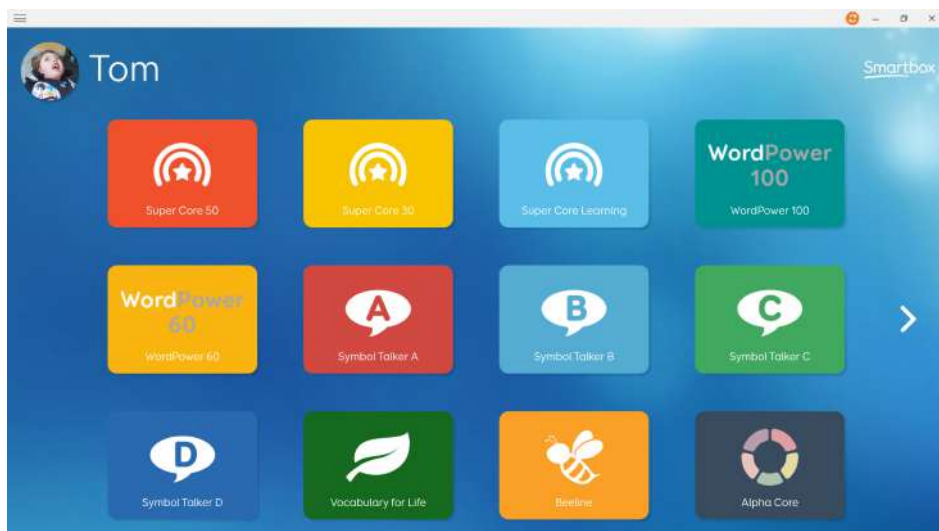

I Grid Explorer kan du se alle dine Grid Layouts. Hvis du vælger et, åbnes det.

Grid Explorer er fuldt tilgængeligt. Du kan bruge din betjeningsmetode til at vælge Grid Layouts, eller navigere mellem sider.

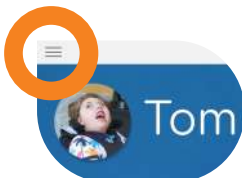

Menuen kan åbnes, hvis du ønsker flere indstillinger.

For at vende tilbage til Grid Explorer fra et Grid Layout skal du vælge **Menu - Grid Explorer**.

Tip: Du kan skjule menuen Grid Explorer i Indstillinger - Computer, hvilket er godt, hvis du bruger touchbetjening med en fingerguide.



Hvis du vil vende tilbage til Grid Explorer, skal du se efter ikonet Grid Explorer. Du kan finde det i mange Grid Layouts.

4

Menuen Grid Explorer



Tilføj Grid Layout

Åbn vinduet Tilføj Grid Layout



Arranger Grid Layouts

Arranger, lav mapper, og fjern Grid Layouts fra Grid Explorer



Del Grid Layouts

Åbn vinduet Del Grid Layouts



Fjernredigering

Log på din Smartbox-konto, og få adgang til godkendte Grid Layouts fra andre brugere



Brugere

Åbn skærbilledet Grid bruger



Indstillinger

Få adgang til Grid-indstillingerne




Hjælp

Åbn vinduet Hjælp i Grid, hvor du kan finde oplysninger om, hvordan du får yderligere support til Grid og Smartbox

Betjeningsindstillinger i Grid

5

Grid understøtter en række betjeningsmetoder, og de kan konfigureres under **Indstillinger - Betjening**.

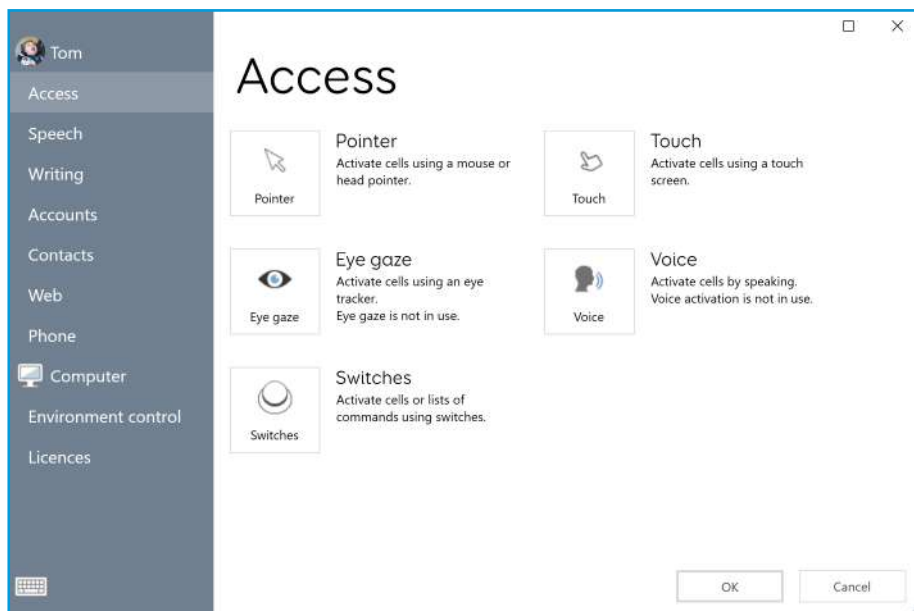

Som standard betjenes Grid med touch, hvis din enhed har en touchskærm og med en mus.

Hver betjeningsmetode har mange forskellige indstillinger og tilgængelige muligheder, der kan optimeres, så de passer til dine behov.

Touchbetjening

Interager med Grid direkte ved hjælp af touchskærmen på din Grid til kommunikationshjælp. Du kan også bruge

en fingerguide til at forbedre nøjagtigheden. Brug indstillingerne til at justere, hvordan Grid skal reagere på din berøring.

Betjening med kontakt

Tilslut kontakter via 3,5 mm kontaktporte, USB-porte eller trådløst. Grid kan konfigureres til at scanne dine Grid Layouts på mange måder, og du kan tilslutte flere kontakter.

Øjenstyring

Grid understøtter en række populære øjenstyringsenheder. Vælg dit kamera, og tilpas indstillingerne, så de passer til dine behov.

Betjening med pegeredskab

Betjening med pegeredskab dækker et bredt udvalg af enheder, fra kuglemus til hovedstyrede mus, som alle styrer musemarkøren på skærmen. I Grids indstillinger kan du tilpasse, hvordan du vil interagere og klikke på skærmen.

Tip: Grid kan også styres med din stemme, hvis du har tale. Konfigurer og sig f.eks. "Hej, Grid 3!" for at starte.

Vælg din stemme

6

Grid har over 200 stemmer på 32 sprog. Du finder dem under Indstillinger - Tale. Brug rullelisten med lande til at finde den ønskede stemme og accent.

Tryk på Lyt for at høre et eksempel på stemmerne.

Hvis en stemme er nedtonet, kan du downloade den til din enhed.

Du kan justere toneleje og tempo for hver stemme for at tilpasse, hvordan den lyder, så den passer præcis til dig.



“Fantasi er vigtigere end viden!”

Tip: Grid understøtter også personlige stemmer fra mange udbydere. Disse stemmer laves ofte ved hjælp af optagelser af rigtige stemmer.

Grid Layouts



Grid Layouts

Et Grid Layout er en samling Grids eller "gitre", der er sammenkædet. Hvert Grid Layout er designet til en bestemt opgave, f.eks. symbolkommunikation eller e-mail.

Grids

Et Grid består af rækker og kolonner, der indeholder celler. De enkelte Grids kan styres med en hvilken som helst betjeningsmetode.



Celler

Celler kan indeholde ord, meddelelser, symboler og mange andre funktioner.

Mange af vores Grid Layouts har vejledninger og håndbøger, der kan hjælpe dig godt fra start med tips til, hvordan de fungerer.

Du finder vejledningerne på vores hjemmeside
thinksmartbox.com



Vælg dine første Grid Layouts

På skærmbilledet Grid Layouts har vi opdelt de forskellige Grids i kategorier. Du kan vælge, hvilke af dem du vil føje til din profil.



Symbolkommunikation

Symbolbaserede Grid Layouts, der kan bruges til at udforske fundamentale ordforråd eller til at bygge sætninger indenfor emner. F.eks. Super Core, WordPower m.m.



Tekstkommunikation

Tekstbaserede Grid Layouts, der indeholder en række tastaturlayouts og yderligere funktioner, f.eks. meddelelsesbank. Det omfatter Fast Talker, Text Talker og Alpha Core.



Interaktiv læring

Sjove aktiviteter, der kan bruges som introduktion til årsag og effekt og at træffe valg. Aktiviteterne er desuden en fantastisk måde at udforske betjening på; med animationer og spil.



Tilgængelighedsapps

Brug sociale medier med apps til Twitter og Facebook, lyt til musik med Spotify, se videoer med YouTube, surf på internettet og meget mere.



Servus omverdenskontrol

Hvis din kommunikationshjælp har indbygget infrarød teknologi eller radio, kan du betjene dit tv, dit hi-fi-anlæg, dine stikkontakter og meget mere fra Grid.



Computerstyring

Brug Grid til at styre Windows og få adgang til andre programmer, f.eks. Microsoft Office, internetbrowsere, spil og meget mere.

Hvis du vil starte med en tom profil, skal du vælge Vælg ingen.

Du kan altid tilføje og fjerne Grid Layouts senere, så det er ikke noget problem, hvis du ikke er sikker på dette tidspunkt.

Symbolkommunikation

Super Core 50

Super Core 30

Super Core-læringsgrids

WordPower 100

WordPower 60

WordPower 25

Beeline

Vocabulary for Life

Symbol Talker A, B, C og D



Super Core 30



Vocabulary for Life

Tekstkommunikation

Fast Talker

Fast Talker med store celler

Alpha Core

TekstTalker



Fast Talker

Interaktiv læring

Årsag og effekt

Træffe valg

Udfordringer

Visuelle scener



Alpha Core

Tilgængelighedsapps

Facebook

Twitter

YouTube

YouTube Kids

Musik og video

Spotify

Amazon Echo

Kamera

Ur

Internetbrowser

SMS


Simple SMS

Telefon

E-mail

Simple Email

Noter

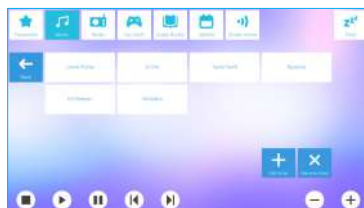

Amazon Echo



Spotify



Facebook

Styring

Servus omverdenskontrol

Simpel Servus

Computerstyring


Computerstyring til kontakter



Web browser

Tilføj flere Grid Layouts

Tilføj flere Grid Layouts til Grid Explorer ved at vælge Tilføj Grid Layout i menuen.

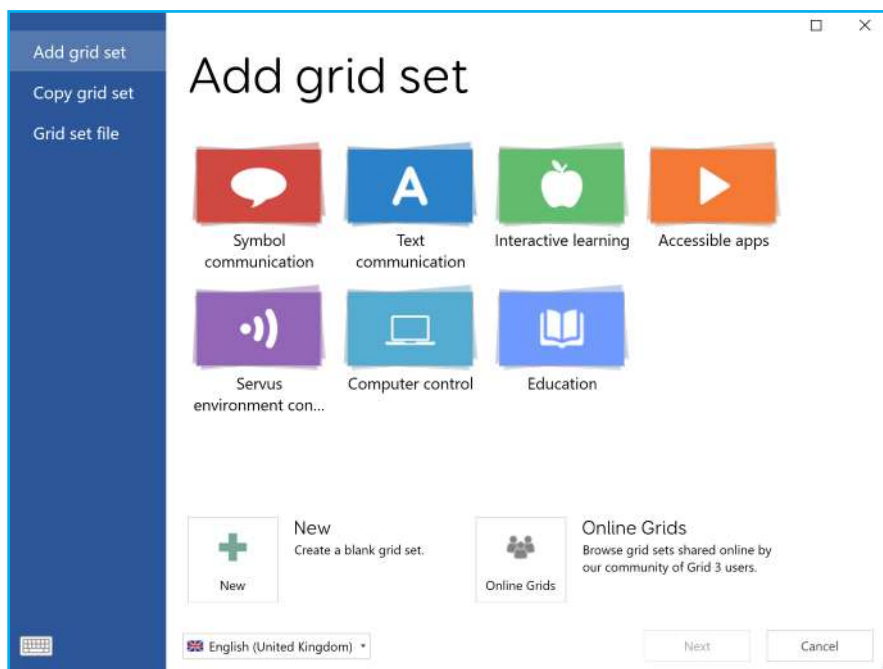


Grid Layouts er organiseret i kategorier, og du kan læse flere oplysninger om hvert Grid Layout, før du føjer det til Grid Explorer.

Alternative versioner af Grid Layouts

11

Mange Grid Layouts har alternative versioner. Det er versioner med andre symbolsæt, små justeringer til specifikke betjeningsmetoder, f.eks. touch- eller kontaktbetjening, alternative tastaturer og meget mere.

Du kan søge efter alternative versioner i vinduet Tilføj Grid Layout.

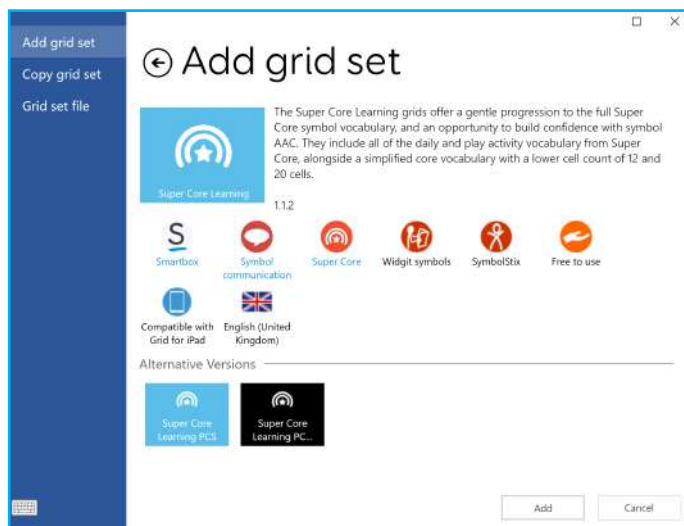


Andre sprog

Mange Grid Layouts er blevet oversat til flere sprog. Du kan skifte sprog i vinduet Tilføj Grid Layout, på rullemenuen.




Online Grids er stedet, hvor du finder Grid Layouts til en lang række opgaver. Der er hundredvis af tilgængelige Grid Layouts, som er designet af vores globale fællesskab af Grid-brugere.

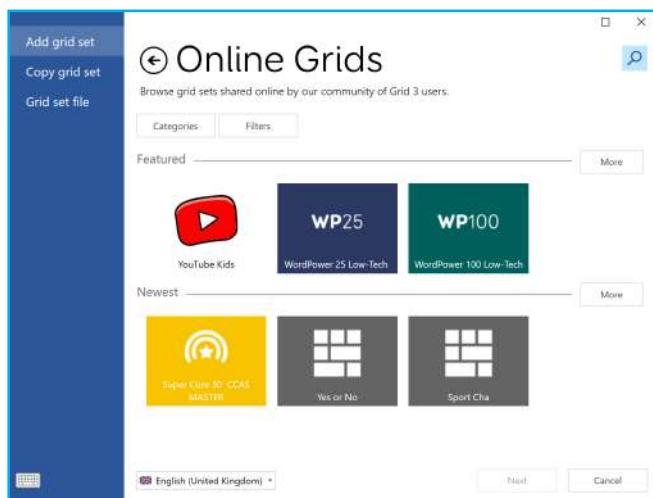

Når du vælger Online Grids i vinduet Tilføj Grid Layout, kan du se udvalgte og nyligt delte Grid Layouts. Du kan søge med forstørrelsesglasikonet og bruge kategorierne samt filtrene for at finde det, du søger.

Her ser du blot tre Grid Layouts delt af vores Smartbox Team.

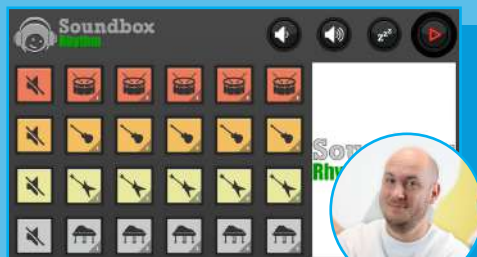


Soundbox by Jim

Grid Layoutet Soundbox gør det muligt for alle, der bruger Grid 3, at begynde at lave musik.

My Communication Passport by Jess

Et praktisk redskab, så personer med komplekse kommunikationsvanskeligheder, som ikke har let ved at tale selv, kan videregive vigtige oplysninger.

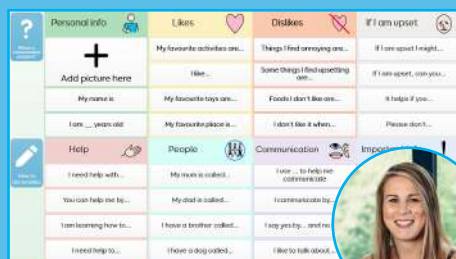

Positioning Guide by Neil

Et nyttigt Grid Layout, der kan bruges til at hjælpe med at placere en øjenstyringsenhed.

Menuen Grid Layouts

Når du befinder dig i et Grid Layout, ændres Grid-menuen for at give dig flere valgmuligheder.



Hjem-grid

Vend tilbage til Grid Layoutets Hjem-grid



Tilbage

Gå et Grid tilbage



Grid Explorer

Luk Grid Layoutet, og vend tilbage til Grid Explorer



Rediger Grid Layout

Åbn redigeringstilstand for at begynde at redigere dit Grid Layout



Rediger ordliste

Rediger ordlisten i dit Grid Layout, hvis der en



Indstillinger

Åbn Grid-indstillingerne



Find ord

Åbn værktøjet Find ord, så du kan finde forekomster af ord i Grid Layoutet og se, hvordan du kommer hen til dem



Udskriv

Udskriv et Grid eller et Grid Layout




Vejledning til Grid Layout

Åbn en internetbrowser for at downloade dokumentationen til Grid Layoutet




Hjælp

Åbn vinduet Hjælp for at se, hvor du kan få yderligere support

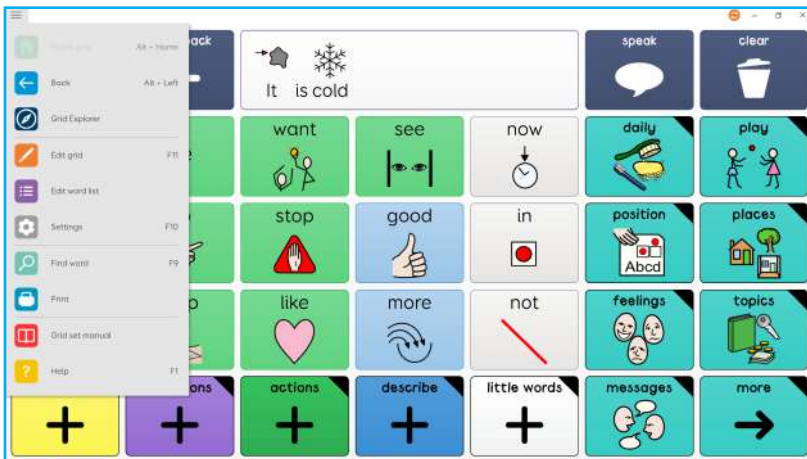

Brug af et Grid Layout til symbolkommunikation

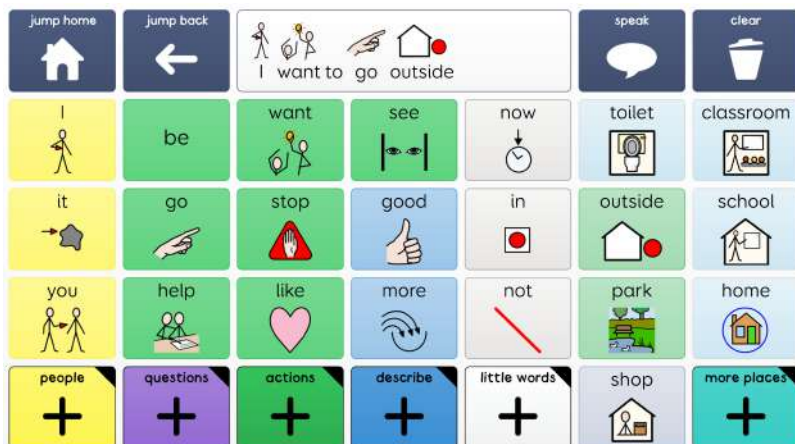

Dette er **Super Core 30**, et symbolbaseret Grid Layout med fundamentalt ordforråd. Dette Grid Layout er opdelt i celler, og hver celle indeholder et ord og et symbol.



Cellerne i den øverste række i dette Grid Layout har forskellige kommandoer samt et felt til at skrive chatbeskeder.



Når du er i gang med at bygge din sætning, vises ordene her.




Grid Layoutene i Super Core er designet med fundamentale ord på hjem-gridet. Når du er i gang med at bygge din sætning, vil du bemærke, at vores Smart Grammar-teknologi opdaterer celler for at gøre det nemmere at bygge sætninger.



Nogle af cellerne er markeret med en lille trekant i hjørnet, disse er spring-celler. Med dem kan du springe til et nyt Grid, hvor der er flere ord, nogle gange med et bestemt emne eller tema. Hvis du bruger knappen Tilbage eller vælger Tilbage i menuen, springer du til det forrige Grid.

Brug af et Grid Layout til tekstkommunikation

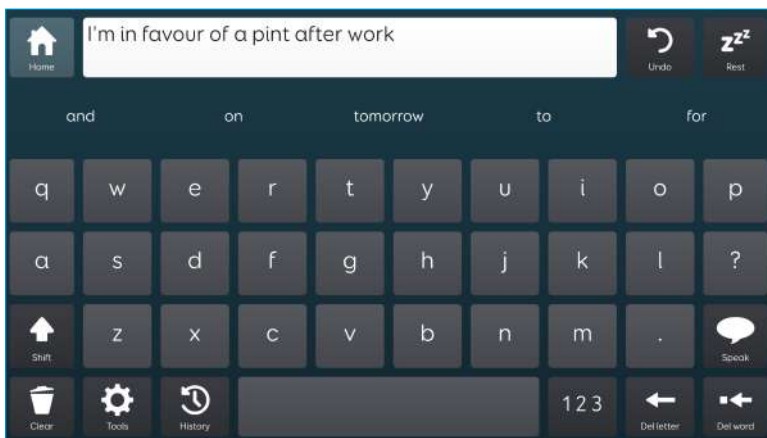


Her ser du Fast Talker, et tekstbaseret Grid Layout med mange effektive funktioner, så du kan skrive dine beskeder lettere og hurtigere.

Din meddelelse vises i chatfeltet øverst i Grid Layoutet, og i højre side har du kommandoen tale.

Ordforslag og chat-historik

Du kan skifte mellem ordforslag og chat-historik med cellen Historik.

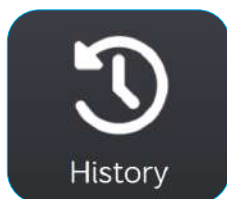

Cellerne til ordforslag og chat-historik vises under feltet til at skrive chatbeskeder. Grid bruger SwiftKey-ordforslag, der foreslår det ord, du skriver, og det næste mulige ord.

Chat-historikken husker alt, hvad du siger, og hjælper dig med at finde det igen hurtigt. Indtast søgeordet i en sætning, f.eks. "kaffe" for at se en række relaterede sætninger



Fast Talker Large Cell

Alternative tastaturer

Mange tekstbaserede Grid Layouts har et alternativt tastaturlayout, f.eks. store celler, kontaktfrekvens, AEIOU og meget mere.

Du finder dem enten i Grid Layoutets indstillinger eller som alternative versioner fra vinduet Tilføj Grid Layout.

Du kan dele Grid Layouts med andre og flytte dem mellem enheder.

Online Grid Layouts

Du kan dele et Grid Layout med andre Grid-brugere via Online Grids. For at gøre det skal du have en Smartbox-konto. I Grid Explorer skal du vælge **Menu - Del Grid Layout**.

Her kan du se alle aktuelt delte Grid Layouts.

Hvis du vælger Tilføj, ser du en liste over alle dine Grids, der kan deles.

Vælg dit Grid Layout, og giv det en beskrivelse, og giv dit Grid Layout den korrekte label.

Grid Layouts, du uploader til Online Grids, kan altid opdateres og fjernes på et senere tidspunkt.

Gem en Grid Layout-fil

Grid Layouts kan gemmes som Grid Layout-filer. Fra **Menu - Del Grid Layouts - Grid Layout**-fil du kan vælge et af dine Grid Layouts og derefter Gem.

Du kan vælge, hvor på din enhed, du vil gemme dit Grid Layout, herunder USB-stik, eksterne drev eller andre delte mapper.




Hvis du vil åbne en Grid Layout-fil, skal du dobbeltklikke på den, hvorefter den føjes til Grid Explorer.

Brug af flere enheder

Hvis du logger på din Smartbox- og Dropbox-konto på en anden enhed eller Grid til iPad, synkroniseres dine Grid Layouts og indstillinger automatisk. Du kan redigere og opdatere dine Grid Layouts på begge enheder, og dine ændringer afspejles begge steder.

For at få adgang til dine Grid-indstillinger skal du vælge **Menu - Indstillinger**.

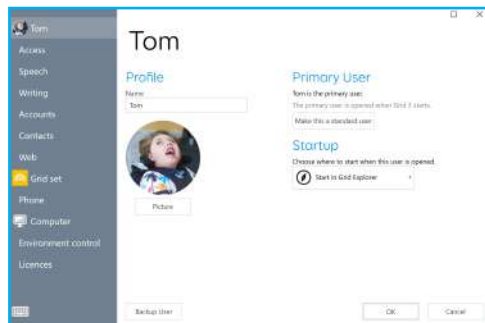

Din brugerprofil

Her kan du ændre dit profilnavn, billede og dine opstartsindstillinger. Du kan også vælge at gøre dig selv til en primær bruger, som automatisk kan indlæse ved opstart.

Betjening

Konfigurer din betjeningsmetode. Vælg mellem kontakt, touch, pegeredskab, øjenstyring eller stemme.

Tale

Juster alle dine stemme- og talefunktioner her samt lydfeedback, hvis du har det aktiveret.

Skrive

Bestem, hvad der skal ske, når du skriver en meddelelse, herunder automatiske erstatninger, chat-historik og symboler.

Konti

Administrer dine Smartbox-, Dropbox- og e-mailkonti.

Kontakter

Tilføj og administrer kontakter til din telefon og dine Grid Layouts til mail

Internet

Administrer dine bogmærker og indstillinger for filtrering af indhold.

Telefon

Tilslut en smartphone til Grid for at foretage og modtage opkald og sende og modtage tekstmeddelelser.

Computer

Bestem, hvordan menulinjen skal vises, og vælg web-kameraer og printere til Grid.

Omverdenskontrol

Konfigurer enheder til omverdenskontrol på kompatibel hardware.

Licenser

Se, om du har aktive licenser til stemmer, symbolbiblioteker eller Grid Layouts.

Grid understøtter flere brugerprofiler med:

- Grid Layouts
- Kontooplysninger
- Indstillinger
- Filer med meddelelser
- Dit Grid Explorer-layout
- Ordforslag
- Ordbog
- Kontakter
- Noter
- E-mail- og tekstmeddelelser

Du kan gøre én bruger til den primære bruger, som kan indstilles til at åbne, når Grid starter.


Tip: Du kan også vælge, hvilket Grid der skal åbnes, når Grid starter, så du kan begynde at tale med det samme!



Sikkerhedskopiering af din brugerprofil

19

Hvis du vil sikkerhedskopiere hele din brugerprofil, beskytte eller flytte den til en anden enhed, kan du tage en komplet kopi af Grid-brugeren ved at vælge **Menu - Indstillinger - Bruger**.

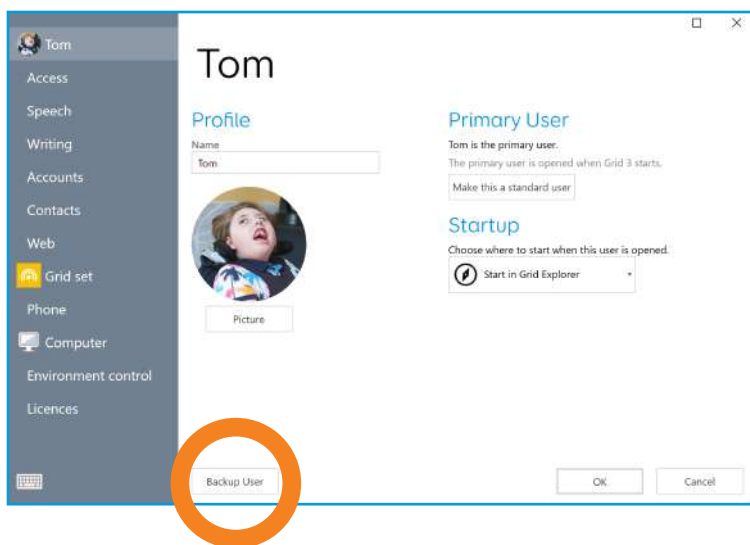

Nederst i vinduet brugerindstillinger finder du knappen Sikkerhedskopier bruger. Tryk på den, og vælg, hvor du vil gemme din sikkerhedskopi.


Gendannelse af en sikkerhedskopi

Du kan gendanne en sikkerhedskopiering af en brugerprofil ved at gå til **Menu - Brugere**. Vælg Gendan sikkerhedskopi for at finde sikkerhedskopifilen på din enhed, og vælg Åbn.

Redigeringstilstand giver dig mulighed for at redigere og tilpasse ethvert Grid Layout eller oprette et nyt Grid Layout fra bunden.

I redigeringstilstand har du fuld kontrol over, hvordan dit Grid Layout skal se ud, og du kan ændre, hvordan hver celle skal opføre sig.

Det kan være lige så enkelt som at føje et ord til et Grid ved at oprette en ny skrivecelle eller tilføje en mere kompleks kommando til celler, f.eks. at tage et billede på et kameragrid.

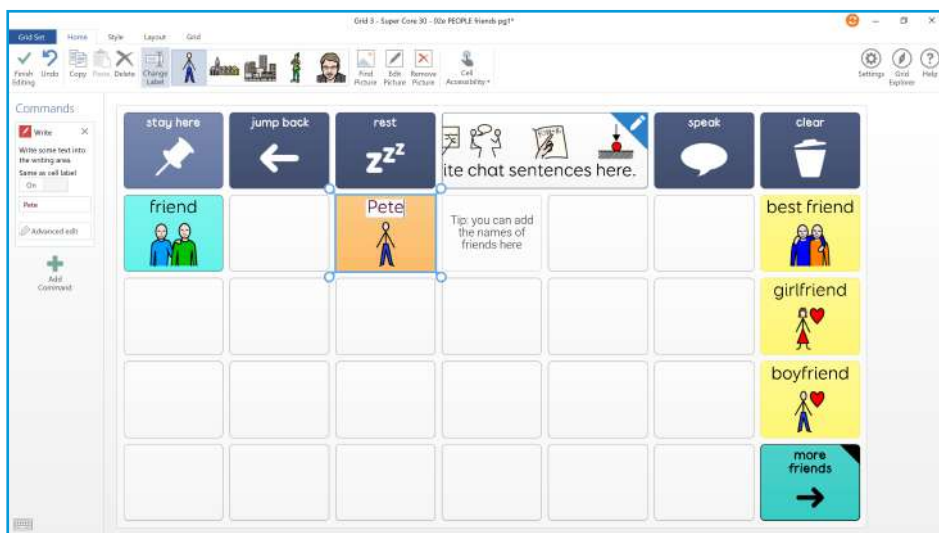




Udseende

Bestem størrelsen, farven og formen på hver celle.

Label

Juster labelens størrelse og skrifttype.

Hello Hello Hello

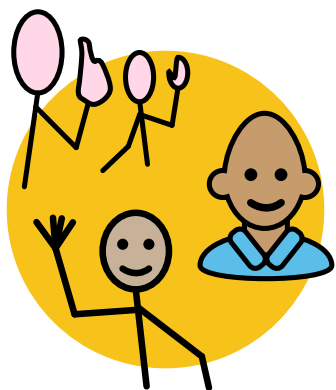

Symbol

Du kan ændre eller redigere symbolet i hver celle. Du kan også vælge et billede.

Få mere at vide i vores Grid Training Center
thinksmartbox.com/training-centre


Fjernredigering giver dig mulighed for at give en anden person adgang til dine Grid Layouts, så han eller hun kan foretage ændringer for dig fra en anden enhed. Du kan fortsætte med at bruge Grid 3, mens personen redigerer dit indhold.

For at aktivere fjernredigering skal du være logget ind på en Smartbox- og Dropbox-konto.

Giv en person adgang til dine Grid Layouts

Du kan give andre brugere tilladelse til at logge på en anden enhed for at redigere dine Grid Layouts.

Vælg **Menu - Indstillinger - Konti**, og derefter Fjerneritorer.

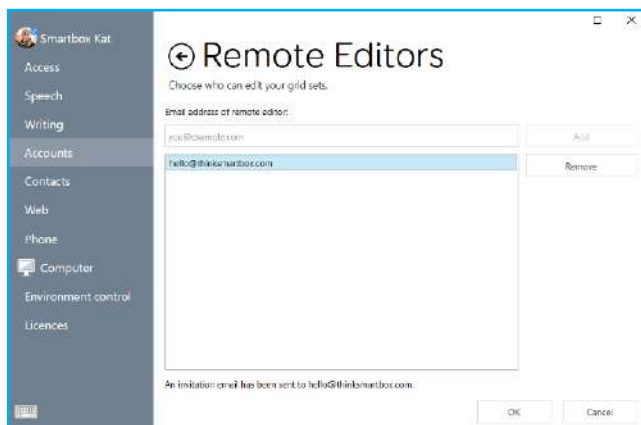

Redaktører

Indtast e-mailadressen på den valgte redigeringsperson, og vælg Tilføj.

Han/hun modtager herefter en e-mail med en invitation til at oprette en Smartbox-konto og installere Grid.

Tip: Du behøver ikke en Grid-licens for at fjernredigere en anden brugers Grid!

Redigering af en anden brugers Grid Layouts

Hvis du har fået adgang til at fjernredigere en anden brugers Grid Layout, skal du logge på fra Grids startskærm. **Vælg Fjernredigering**, og log på med din Smartbox-konto.

Du ser nu en liste over brugere, som har inviteret dig til at redigere. Vælg en bruger, hvorefter du kommer videre til vedkommendes Grid Explorer. Herfra kan du frit åbne Grid Layouts og springe til redigeringstilstand for at foretage ændringer.

Grid udvikles løbende for at levere nye funktioner, indhold og fejlrettelser, så vi anbefaler, at du altid holder Grid opdateret.

Når din enhed har forbindelse til internettet, søger Grid efter eventuelle opdateringer, når det starter op. Hvis en opdatering er tilgængelig, vil du se denne meddelelse øverst til højre i vinduet. Tryk på ikonet for at starte opdateringen.



Sådan bruges Smartbox-opdatering

Du kan søge manuelt efter opdateringer ved hjælp af Smartbox Update. Programmet Smartbox Update findes i menuen Start.

Support

23

Vores supportteam står klar til at hjælpe.



Online chat

Thinksmartbox.com

E-mail

support@thinksmartbox.com



Telefon

UK: 01684 578868

US: (878) 302-3674

Tilsluttet brug

- Grid 3 bruges som kommunikationshjælp med talegengivelse (VOCA)
- Grid 3 bruges til at styre en Windows-computer
- Grid 3 bruges til at betjene eksterne enheder via omverdensstyring

Tilsluttet bruger

Grid 3 er designet til personer med komplekse kommunikations- og/eller betjeningsbehov.

Tilsluttet miljø

Grid 3 kan bruges i en række forskellige miljøer, herunder:

- private hjem
- boliger med støtte
- plejecentre
- skoler, gymnasier, universiteter
- i lokalområdet, f.eks. butikker, spisesteder
- hospitaler (akut, rehabilitering og lokalt)

Vigtige kontraindikationer, advarsler og forholdsregler

Grid 3 er designet til at hjælpe med udtryksfuld kommunikation. Grid 3 bør anvendes i kombination

med forskellige alternative og supplerende kommunikationsmetoder (ASK), og man bør derfor ikke stole på, at en person kan kommunikere ekspressivt udelukkende ved hjælp af enheden. Andre ASK-metoder kan omfatte brug af papirbaserede systemer, tegnsprog eller øjenstyringsrammer.

Enheden er designet og fremstillet til at være ekstremt robust og pålidelig, men kan stoppe med at fungere optimalt pga. strømsvigt eller andre tekniske problemer. Derfor bør Grid 3 ikke:

- bruges som et livsnødvendigt udstyr
- udgøre en nødvendighed for dit helbred
- være brugerens eneste metode til at foretage et nødopkald eller en alarm
- bruges til administration af medicin
- være den eneste metode, brugeren har til at interagere med enheder til omverdenskontrol

Grid 3 er heller ikke beregnet til at give oplysninger, der anvendes til at træffe beslutninger med diagnostiske eller terapeutiske formål.

Processor	1,33 GHz Quad Core eller hurtigere
Hukommelse	2 GB RAM eller mere
Harddisk	3 GB + HDD-plads
Operativsystem	Windows 8, 8.1, 10 Home og Pro



Kom med i Smartbox- fællesskabet

Et imødekommende sted, hvor brugere af Grid deler ideer, stiller spørgsmål og meget mere.

thinksmartbox.com/facebook



Få mere ud af Grid

Få mere at vide om tip til redigering og
avancerede indstillinger i vores Grid
Training Center

thinksmartbox.com/learn-at-home

Document: Getting Started with Grid - DK - A
Language: Denmark (DK)
Date of issue: June 2021

Copyright 2021 Smartbox Assistive Technology
thinksmartbox.com

G3-MAN-DK-A