

Falck 5716 FjärrKontroll

Art.nr.: 538 080



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Innehållsförteckning

Exempel på användning	2
Inledning.....	3
Möjligheter	3
Programmering.....	4
Överföring av IR-signaler	4
Illustration för programmering.....	5
Design.....	6
Hur du nollställer Fjärrkontroll.....	6
Tekniska data:.....	7
Rengöring:	7
Fungerar/fungerar inte.....	7
På grund av säkerhet	7
Säkerhet.....	8

Exempel på användning

Kanske det räcker om man kan slå på och av kanal 1 och kanal 2 på TV`n? Kanske vill man välja mellan flera kanaler, eller att styra CD spelaren och Videon från en och samma fjärrkontroll? Då har man från 1 till 16 möjligheter att göra vardagen enklare och lättare.

Inledning

Falck 5716 FjärrKontroll gör det lätt att hantera elektrisk utrustning som styrs med en vanlig IR- Fjärrkontroll (tex. TV, Video, CD-spelare mm)

Falck FjärrKontroll kan hjälpa personer som på grund av nedsatt syn, motorik, kognitiv svikt, eller andra orsaker inte kan använda en vanlig fjärrkontroll.

Den avgränsar valmöjligheterna och har stora tydliga fält som enkelt kan illustreras med bilder och symboler.

Möjligheter

- Förenkla användningen av t.ex. en TV med att bara ha tillgång till önskade funktioner.
- Man kan lägga in signaler från olika fjärrkontroller för att styra olika apparater med en och samma fjärrkontroll.
- Fjärrkontrollen har 16 knappar som programmeras var för sig.
- Fälten kan märkas individuellt med text, bilder eller symboler som gör det lättare att både förstå och se vilken funktion man trycker på.
- Fjärrkontrollen är lärbar och det är enkelt att programmera de funktioner som önskas.
- Stora fält med inbyggd fingerguide gör det enkelt att träffa rätt.
- Kräver liten tryckkraft.
- Den vanliga fjärrkontrollen kan användas parallellt av andra i huset.

Programmering

Programmeringsknappen finns på undersidan av FjärrKontrollen.

1. Tryck och håll programmeringsknappen i 3 sekunder.
Ett långt pip hörs och indikatorlampan lyser.
- Släpp programmeringsknappen.
2. Tryck på det fält som ska programmeras. Det hörs ett kort pip och indikatorlampan blinkar sakta.
- Släpp fältet.
3. Lägg *Falck FjärrKontroll* och den ordinarie fjärrkontrollen på bordet så de pekar mot varandra (se illustration).
4. Innan det gått 10 sekunder: Tryck ett kort tryck (1/2 sek) på den funktion på den ordinarie fjärrkontrollen som du önskar överföra till *Falck FjärrKontroll*.

Detta är speciellt viktigt när man överför signalen för "volym upp". Trycker man ett långt tryck kommer volymen öka så länge som man håller på fältet. Trycker man däremot kort tid när man överför signalen, lär man *Falck FjärrKontroll* att reglera volymen gradvis. Det samma gäller också vid överföring av andra funktioner, t.ex. vid kanal upp.

Överföring av IR-signaler

- Indikatorlampan kommer att blinka fort så länge IR-signalerna överförs.
- Ett långt pip + att indikatorlampan lyser bekräftar att programmering är ok.
- När IR överföringen upphör slocknar indikatorlampan.
- 3 korta pip + 3 korta blinkningar på lampan indikerar fel.
- Om man väntar längre än 10 sekunder eller trycker på ett annat fält innan man överför IR-signalerna, kommer programmeringen att avbrytas.
- Se till att inga föremål ligger i vägen och hindrar överföring av IR-signaler.
- Utför punkt 1-4 för varje knapp du vill programmera.
- FjärrKontrollen fungerar inte om man inte har programmerat den. Det kommer inte pipa eller blinka någon lampa föränn den er programmerat.

Obs


Om samma signal (ex. PÅ / AV eller play / pause) skall överföras för både PÅ och AV på Falck FjärrKontroll, skall det göras med **två påföljande tryck** från originalkontrollen.

Ett mellanliggande tryck på samma eller en annan knapp på originalfjärrkontrollen kan leda till fel i programmeringen. Vid fel, börja om från start igen.

Starkt solljus eller starka lysrör kan ge IR-störningar och orsaka fel i programmeringen.

Avskärma området mellan fjärrkontrollen och IR-fönstret på Falck FjärrKontroll medan du programmerar, om det är väldigt starkt ljus i rummet: Håll handen över som en tunnel, täck området med ett lock, en låda eller liknande för att avskärma mot oönskat IR-ljus.

Illustration för programmering

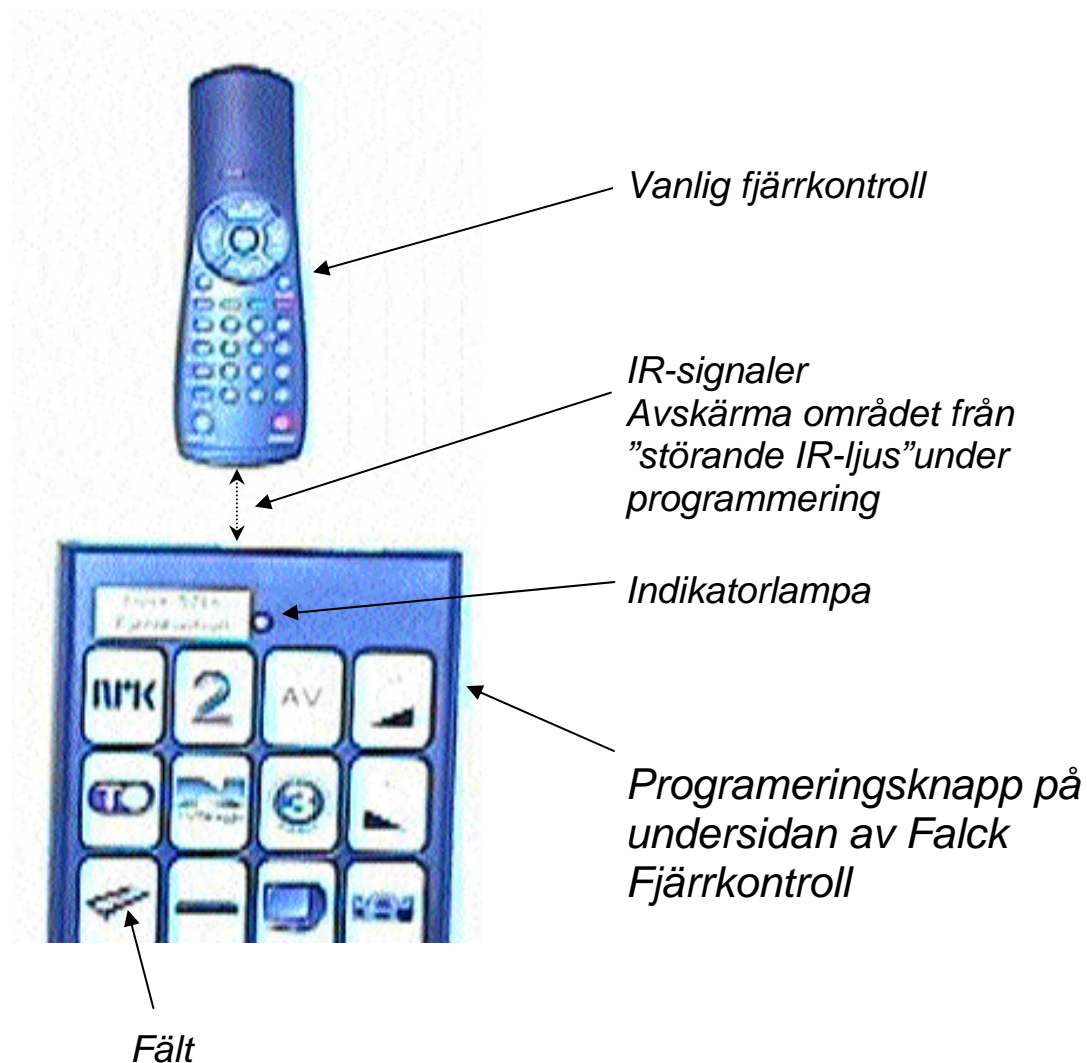

Design

- Man kan använda så många fält man önskar.
- Man kan använda symboler, bilder, text eller taktila överlägg till synskadade för att illustrera fälten.
- Symboler och bilder bör skyddas med bokplast så det tål rengöring.
- Möjlighet till stor text och goda kontraster.
- Levereras med exempel på överlägg.

Hur du nollställer Fjärrkontroll

Tryck och håll inne programmeringsknappen i c:a 10 sek.
Släpp knappen när fjärrkontrollen har pipit 2 gånger.

Tryck och håll ned knapp 8, 9 och 16 samtidigt, tills du hör ett pip.
Fjärrkontrollen är nu nollställd.

På vissa fjärrkontroller måste knapp 1, 8, 9 tryckas ner.
Knapp 1 är överst till vänster.

För att bekräfta att fjärrkontrollen är nollställd, ska det inte höras något pip när du trycker ned någon knapp.

Tekniska data:

Mått kapsling:.....	245x160x45 mm
Vikt:	580 g m batteri
Färg:	Svart
Tryckkraft:.....	ca 80 g
Batteri:.....	9 Volts alkaliskt blockbatteri
Hållbarhet batteri.....	Ca 1 år
Fältens storlek:	40x30 mm, 16 fält
IR-mottagare.....	inbyggd
IR-sändare	inbyggd
Programmeringsknapp.....	inbyggd

Auditiv/visuell feedback vid tryck på fält.
Levereras med exempel på överlägg.

Rengöring:

Fjärrkontrollen görs ren med en lätt fuktad trasa.

Fungerar/fungerar inte

Falck 5716 FjärrKontroll går att använda med de flesta IR-styrda apparater, men inte med alla. Det här gäller alla Bang Olufsen och flera Salora apparater. Det kan också gälla för andra. Är du osäker ta kontakt med oss.

På grund av säkerhet

IR-styrd utrustning (t ex TV) bör slås av med huvudströmbrytaren på natten.

Säkerhet

Abilia har utarbetat en riskanalys för produkten med hänvisning till **NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr**. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument. Vid idrifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har tagit i drift eller ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Abilia AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia AB`s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Version 12.juli 2005

