

# Håndbog Handi5 SW

Art.nr 402360



Software version 5.3.4 eller nyere



# Indhold

1. Indledning .....	5
1.1 Terminologi.....	5
1.2 Systemkrav .....	6
1.3 Support.....	6
2. Installation.....	7
2.1 Installation med USB-nøgle .....	7
2.2 Installation ved download .....	12
3. Tillpas Handi 5 .....	15
3.1 Indstillingstilstande .....	15
3.2 Gå til indstillingstilstand .....	15
3.3 Startskærm .....	16
3.4 Telefonabonnement.....	17
3.5 WiFi .....	17
3.6 Google-konto .....	17
3.7 Apps .....	18
3.8 Kodebeskyt indstillinger .....	18
3.9 Talestøtte.....	18
3.10 Billedarkiv .....	19
3.11 Installér HandiTools .....	19
3.12 Sikkerhed.....	19
3.13 Importér Handi 4 brugerdata.....	20
3.14 Kopiere kontakter til Handi.....	21
4. Om apps .....	22
4.1 Download apps.....	22
4.2 Fjern apps.....	24
5. Afinstallation .....	25
5.1 Forskellige scenario for afinstallation.....	25
5.2 Deaktiver licensen .....	26
5.3 Afinstaller Handi 5 .....	26
5.4 Slet installationsfiler .....	27
6. Tekniske data .....	27
6.1 Brugermiljø .....	27
6.2 Medfølgende artikler .....	27



# 1. Indledning

**Handi5 SW** er en applikationspakke for personer med kognitive funktions-nedsættelser. **Handi5 SW** kan installeres på Android-baserede enheder der opfylder de systemkrav som specificeres i separat kapitel. Artikelnummeret er 402360.

Med **Handi5 SW** får man adgang til alle de applikationer, der tilbydes på markedet, f.eks. e-mail, sociale medier, rejseplanen, kort, tv-guide m.m., men samtidigt også den tilpassede støtte fra Handifunktionerne.

Ved hjælp af indstillinger kan man "indkapsle" sin enhed, dvs. sætte nogle begrænsninger på, hvordan startmenuen skal se ud. Man kan også beslutte, om brugeren selv skal have adgang til at downloade nye applikationer.

Grundtanken med Handi 5 er at begrænse brugen af den på en kontrolleret måde. På den måde kan man give en struktureret oplæring af dens brug og efterhånden en tilpasset og effektiv funktionalitet.

I Handi 5 indgår flere af de Handifunktioner, der er udviklet gennem mange år og praktisk erfaring i tæt samarbejde med brugere. Handifunktionerne er Afspiller, Album, Diktafon, Hurtigindstillinger, Kalender, Kontakter, Kriseplan, Min Status, Notater, Prisberegneren, Sms, Statussvar, Telefon og Tjekliste.


Dette dokument beskriver, hvordan man installerer **Handi5 SW** samt giver tips om hvordan man kommer i gang og tilpasser en enhed med Handi 5.

*Brugervejledning Handi 5* indeholder beskrivelser af principper, funktioner og indstillinger for Handi 5. Den bør man også læse for at få viden om Handi og Handifunktionerne.

Til at overføre billeder etc. fra en pc til Handi anvendes pc-programmet HandiTools. Via HandiTools kan man også oprette og håndtere skemaer. Andre vigtige funktioner i HandiTools er, at man kan sikkerhedskopiere indholdet i Handi samt få logfiler, der kan bruges i forbindelse med fejlsøgning. HandiTools leveres sammen med **Handi5 SW**.

## 1.1 Terminologi

I denne håndbog bruges følgende begreber.

Telefon/Telefonmodel	Android-baseret smartphone eller tablet.
Handi5 SW	Applikationspakke med Handi-funktioner, startskærm, tastatur samt bundet talesyntese.
Hukommelse	Telefonens hukommelse. Det kan være et eksternt hukommelseskort og/eller internt telefonhukommelse/hukommelseskort.
Installationsfiler	De filer som udgør Handi 5-installationen; Handi.apk, grundindstillinger samt talesyntese.
Handi5 SW USB-nøgle	USB-nøgle med installationsfilerne.
Handi USB-nøgle	USB-nøgle med HandiTools og dokumentation.
Hjem-knap	En funktionsknap, oftest med et hus-symbol  , som bruges for at komme til startskærmen.

Startskærm	Telefonens startmenu. Hertil kommer man altid når man trykker på <i>Hjem</i> -knappen.
<i>Håndbogen for din telefonmodel</i>	Den brugervejledning som leveres med telefonen.
Indstillingstilstand	Indstillingsmenu der man laver indstillinger for Handi, se 3.1 <i>Indstillingstilstande</i> .
Knapkombinationen	En knapkombination for at komme over i indstillingstilstande, se 3.2.2 <i>Knapkombinationen</i> .

## 1.2 Systemkrav

**Handi5 SW** kan installeres på telefoner med mindst Android-version 2.3.3. Det kræves mindst 400 MB ledig plads på den hukommelse hvor **Handi5 SW** skal installeres.

Det anbefales kun at installere **Handi5 SW** på telefoner testet af Abilia, se [www.abilia.dk](http://www.abilia.dk).

## 1.3 Support

Aabentoft kan give support til Handifunktionerne. Aabentoft kan ikke påtage sig service og support til alle de applikationer, som tilbydes på markedet. Der kan Aabentoft kun være rådgivende og vejledende.

## 1.4 Licens

Handi 5 SW leveres med licensnøgle (til Handi5 SW-licens) Det betyder, at:

- **Muligt at flytte Handi til en anden telefon.** Hvis brugeren ønsker skifte til en anden telefon kan licensen deaktiveres og flyttes til anden telefon.
- **3-årig supportlicens.** Programmet kan opdateres i 3 år. Efter 3 år stadig virker Handi5 SW, men du ikke længere har adgang til opdateringerne. For at kunne fortsætte med at opdatere softwaren og få support efter 3 år, kan licensen forlænges, se nedenfor.

### 1.4 Forlængelse af licensen

For at forlænge licensen i yderligere 3 år bestilles artikel 706362 *Handi5 SW Forlængelse* fra Aabentoft. Licensnøglen skal angives ved bestilling.

For at aktivere forlængelse af licensen skal man efterfølgende gå til **Indstillinger|System|Licenshåndtering** og trykke på *Søg licensforlængelse*. Sørg for at der er internetadgang.

## 2. Installation

I dette kapitel gives en generel beskrivelse af hvordan man installerer **Handi5 SW**. Billederne viser hvordan det ser ud på en *Samsung Galaxy Xcover 2*, men tilsvarende sider bør vises på andre telefonmodeller.

Installationen kan gøres ved at manuelt overføre filer fra Handi5 SW USB-nøgle eller ved at downloade installationsfiler. Begge metoder beskrives her.


**Tips!** Hvis Handi5 SW skal installeres på en enhed med Android-version 4.1 eller højere kan metode *2.2 Installation ved download* med fordel vælges. For installation på ældre Android-version, eller fx hvis man ikke har mulighed at downloade meget data via WiFi anbefales metode *2.1 Installation med USB-nøgle*.

### 2.1 Installation med USB-nøgle

#### 2.1.1 Sæt hak ved "Ukendte kilder"

Gå til Indstillinger og find indstillingen "Ukendte kilder". På Samsung Galaxy Xcover 2 ligger denne indstilling under **Sikkerhed**.

Sæt hak ved "Ukendte kilder" for at tillade installation fra andre kilder end Play Butik.

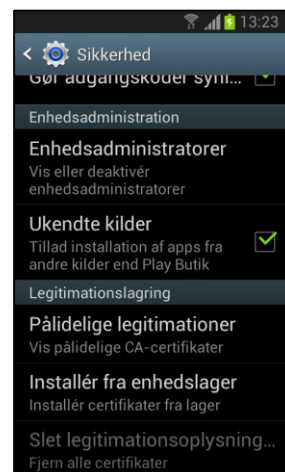

#### 2.1.2 Overfør installationsfiler til telefonen

##### 2.1.2.1 Bestem om installationsfilerne skal ligge på eksternt eller internt hukommelse

**Vigtigt:** Installationsfilerne skal lægges på den hukommelse hvor man ønsker at gemme brugerdata, fx billedarkiv og stemmenotater.

Hvis telefonen har Android-version 4.1 eller højere bør Handi5 SW installeres på den interne hukommelse (undtagen Samsung Galaxy Xcover 2). Fra Android-version 4.4 er det ikke længere muligt at installere på et eksternt hukommelseskort.

Hvis Android-versionen er lavere end 4.1 anbefales det at lægge installationsfilerne på et eksternt hukommelseskort, da pladsen på den interne hukommelse sandsynligvis er begrænset.

##### 2.1.2.2 Tilslut telefonen til computeren

Hvis installationsfilerne skal lægges på et eksternt hukommelseskort og hvis computeren har en kortlæser for det kort kan det være nemmere at overføre filerne ved hjælp af kortlæseren.


Hvis telefonen skal tilsluttes computeren er det nødvendigt at installere drivers for at telefonen skal vises i Windows Stifinder. Oftest er det tilstrækkeligt med de generelle drivers, og de plejer at blive installeret automatisk.

### 2.1.2.3 Indsæt i Handi5 SW USB-nøgle i computeren


Sæt i **Handi5 SW USB-nøgle** i computeren og start Stifinderen. Vent til den vises som en *Flyttbar disk*.

### 2.1.2.4 Overfør installationsfiler

Kopier *Handi.apk* og mappen *Handi* på **Handi5 SW USB-nøgle**:

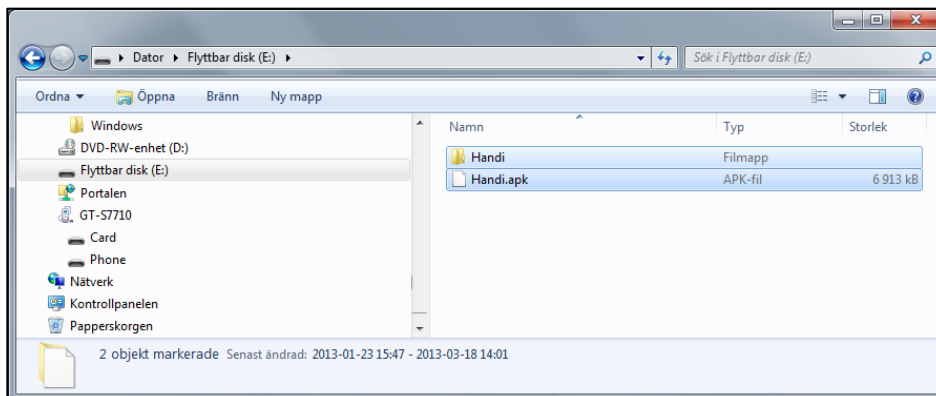

”Indsæt” på ”roten” på det valgte hukommelse så det ser ud som på billedet forneden:

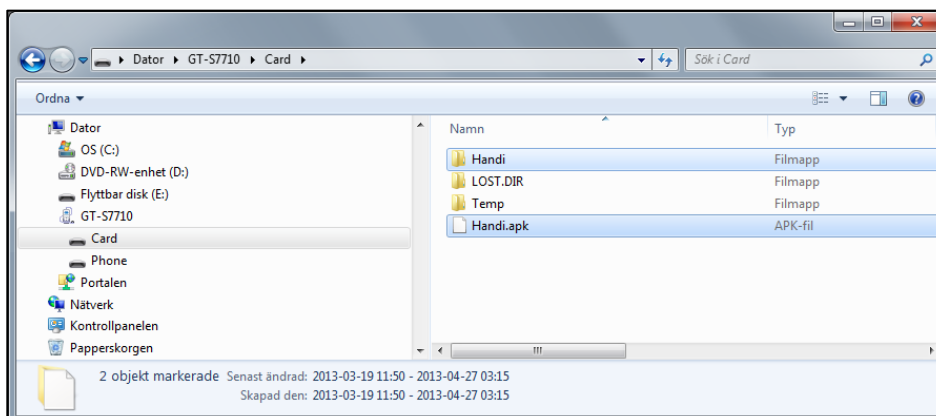

Der er ca 400 MB der skal kopieres over, så kopieringen kan tage lidt tid.

Frakoble derefter telefonen fra computeren.



### 2.1.3 Installere Handi5 SW

Handi 5 installeres enklest via en Filhåndterer/Stifinder. Hvis du ikke kan finde sådan en på telefonen kan man downloade Handi.apk. Nedenfor beskrives begge alternativer.


#### 2.1.3.1 Alternativ 1: Start Handi.apk via Stifinder

På de fleste nye smartphones indgår en Stifinder. For Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den *Mine filer*. Der findes også en Stifinder som kan downloades fra Play Butik, fx *Astro*.

Tjek om der på telefonen findes en Stifinder. Hvis der ikke findes nogen og hvis det ikke er aktuelt at downloade nogen, gå til næste afsnit 2.1.3.2 *Alternativ 2: Download Handi.apk fra webside*.

Ellers, åbne Stifinderen og gå til den hukommelse hvor installationsfilerne inkl. Handi.apk er blevet kopieret.

Tryk på *Handi.apk*.

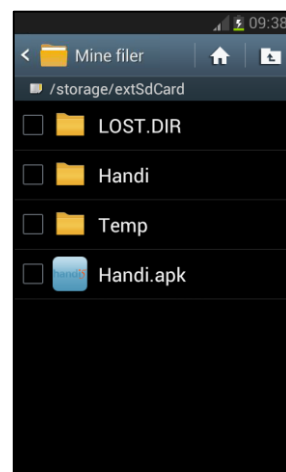



#### 2.1.3.2 Alternativ 2: Download Handi.apk fra webside

**Sørg for at telefonen har internettilslutning.**

Start telefonens webblæser, på Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den *Internet*.

Indskriv adressen [handitek.se/latest-handi5](http://handitek.se/latest-handi5) og tryk på <Enter>. Nu hentes Handi.apk, hvilket vises i statusfeltet.

Træk statuslisten ned når downloaden er klar og tryk på *Handi.apk*.

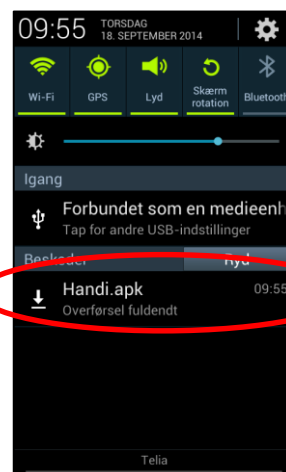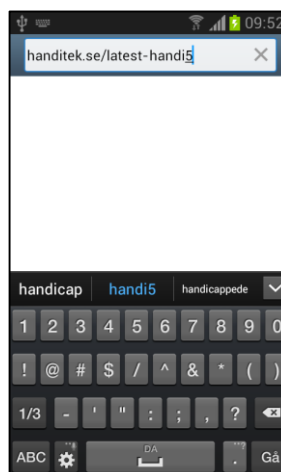

### 2.1.3.3 Installer *Handi.apk*

En side lignende den til højre vises. Tryk på *Installér*.

Tryk på *Åbn* når installationen er klar.



### 2.1.4 Aktiver licens


***Her kræves internettilslutning.***

Tryk på *Indtast licensnøgle* for at indskrive den licensnøgle som findes på værdibeviset for **Handi5 SW**.

Når licensen er aktiveret vises en meddelelse som på det højre skærbillede. Tryk på *OK*.

*Hvis denne fejlmeddelelse vises, er det fordi din Android-version er for gammel til at installere Handi på denne måde:*

*"Der mangler nødvendige filer for at Handi skal fungere korrekt."*

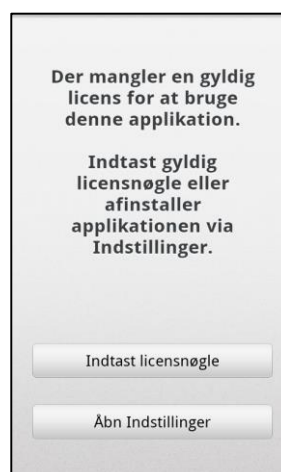

### 2.1.5 Vælg startskærm

Ved tryk på *Hjem*-knappen vises sandsynligvis en side lignende den til højre. Her skal du vælge hvilken startskærm der fremover skal bruges når der trykkes på *Hjem*-knappen.

Vælg *Handi Startmenu* og tryk på knappen tilsvarende *Altid*.

Dette valg kan ændres efterfølgende, se 3.3.1 *Vælg anden startskærm*.

Hvis Handi Startmenu ikke skal bruges: Start en af Handi-funktionerne, fx Kalender, for at komme til næste moment *Hent systemfiler*.



## 2.1.6 Konfigurer Handi

Tryk på *Hjem*-knappen for at konfigurere Handi. En guide starter, vælg konfigurationsalternativ:


**Ny Handi-bruger.** Sletter evt Handi-data på hukommelseskortet og opretter en helt ny bruger. Evt. øvrig information i hukommelsen bevares.

**Eksisterende brugere.** Viser hvis der findes en Handi-backup på hukommelseskortet. Geninstallerer database, indstillinger mm. Intet ændres på hukommelseskortet.

**Slette hukommelseskortet.** Raderer alt på hukommelseskortet og opretter en helt ny bruger.

Nedenfor beskrives de forskellige momenter i guiden.



1. Vælg konfigurationstype og tryk på *Næste* .  
Ved alternativene *Ny Handi-bruger* og *Slette hukommelseskortet*: Vælg grundindstilling, *Niveau 1*, *Niveau 2* eller *Niveau 3* og tryk på *Næste*. (Se *Brugervejledning Handi 5* for beskrivelse af de forskellige niveauer. Niveau kan nemt ændres senere.) Tryk *JA* for at bekræfte den valgte konfiguration.
2. Billedet "Velkommen til Handi5!" vises. Det er starten på en guide. Tryk på *Næste*.
3. Billedet "Indstil dato og tid" vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk på *Næste*.
4. Billedet "Godkend tastatur" vises. Tryk på *Næste*.
5. Billedet "Vælg indtastningsmetode" vises. Vælg *Handi Tastatur*. (Denne indstilling medfører altså, at tastaturet altid er alfabetisk i portrætvisning og QWERTY i landskabsvisning).
6. Billedet "Færdig!" vises. Tryk på *OK*. Startmenuen vises:



## 2.2 Installation ved download


### 2.2.1 Tilslut telefonen til Internet

Sørg for at telefonen er tilsluttet internet, helst via WiFi.

### 2.2.2 Sæt hak ved "Ukendte kilder"

Gå til Indstillinger og find indstillingen "Ukendte kilder". På Samsung Galaxy Xcover 2 ligger denne indstilling under **Sikkerhed**.

Sæt hak ved "Ukendte kilder" for at tillade installation fra andre kilder end Play Butik.


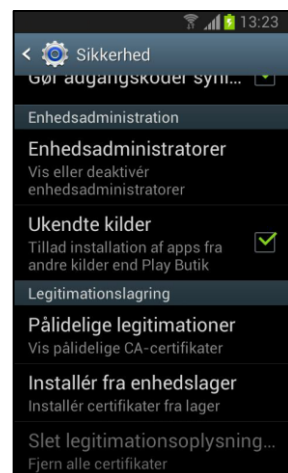


### 2.2.3 Download Handi.apk fra webside

Start telefonens webblæser, på Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den *Internet*.

Indskriv adressen [handitek.se/latest-handi5](http://handitek.se/latest-handi5) og tryk på <Enter>. Nu hentes Handi.apk, hvilket vises i statusfeltet.

Træk statuslisten ned når downloaden er klar og tryk på *Handi.apk*.

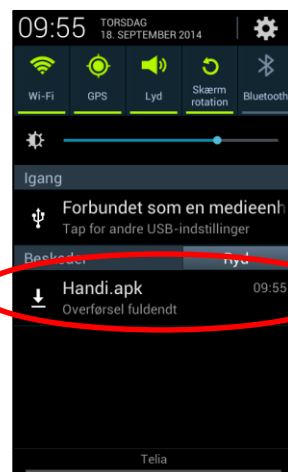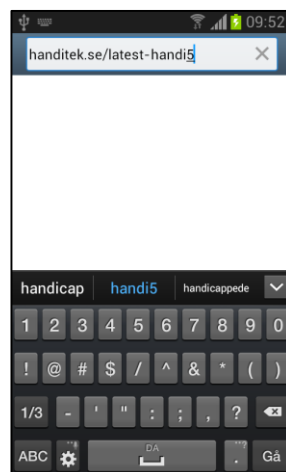

### 2.2.4 Installer Handi.apk

En side lignende den til højre vises. Tryk på *Installér*.

Tryk på *Åbn* når installationen er klar.



## 2.2.5 Aktiver licens

Tryk på *Indtast licensnøgle* for at indskrive den licensnøgle som findes på værdibeviset for **Handi5 SW**.

Når licensen er aktiveret vises en meddelelse som på det højre skærbillede. Tryk på *OK*.

*Hvis denne fejlmeddelelse vises, er det fordi din Android-version er for gammel til at installere Handi på denne måde:*

*"Der mangler nødvendige filer for at Handi skal fungere korrekt."*



## 2.2.6 Vælg startskærm

Ved tryk på *Hjem*-knappen vises sandsynligvis en side lignende den til højre. Her skal du vælge hvilken startskærm der fremover skal bruges når der trykkes på *Hjem*-knappen.

Vælg *Handi Startmenu* og tryk på knappen tilsvarende *Altid*.

Dette valg kan ændres efterfølgende, se 3.3.1 *Vælg anden startskærm*.

Hvis Handi Startmenu ikke skal bruges: Start en af Handi-funktionerne, fx Kalender, for at komme til næste moment *Hent systemfiler*.




## 2.2.7 Hent systemfiler

For at Handi skal kunne bruges på en god måde skal systemfiler downloades.

Afkryds de talesyntese-stemmer der skal downloades.

Tryk på *Næste* .

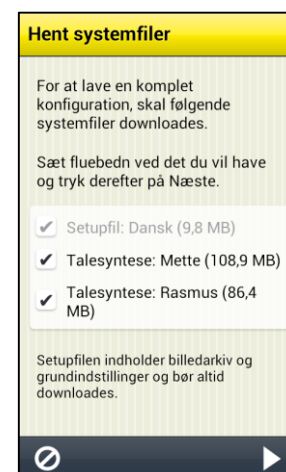

## 2.2.8 Konfigurer Handi

Tryk på *Hjem*-knappen for at konfigurere Handi. En guide starter, vælg konfigurationsalternativ:


**Ny Handi-bruger.** Sletter evt Handi-data på hukommelseskortet og opretter en helt ny bruger. Evt. øvrig information i hukommelsen bevares.

**Eksisterende brugere.** Vises hvis der findes en Handi-backup på hukommelseskortet. Geninstallerer databas, indstillinger mm. Intet ændres på hukommelseskortet.

**Slette hukommelseskortet.** Raderer alt på hukommelseskortet og opretter en helt ny bruger.

Nedenfor beskrives de forskellige momenter i guiden.



1. Vælg konfigurationstype og tryk på *Næste* .  
Ved alternativen *Ny Handi-bruger* og *Slette hukommelseskortet*: Vælg grundindstilling, *Niveau 1*, *Niveau 2* eller *Niveau 3* og tryk på *Næste*. (Se *Brugervejledning Handi 5* for beskrivelse af de forskellige niveauer. Niveau kan nemt ændres senere.) Tryk *JA* for at bekræfte den valgte konfiguration.
2. Billedet "Velkommen til Handi5!" vises. Det er starten på en guide. Tryk på *Næste*.
3. Billedet "Indstil dato og tid" vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk på *Næste*.
4. Billedet "Godkend tastatur" vises. Tryk på *Næste*.
5. Billedet "Vælg indtastningsmetode" vises. Vælg *Handi Tastatur*. (Denne indstilling medfører altså, at tastaturet altid er alfabetisk i portrætvisning og QWERTY i landskabsvisning).
6. Billedet "Færdig!" vises. Tryk på *OK*. Startmenuen vises:





### 3. Tillpas Handi 5

Handi 5 kan tilpasses på mange forskellige måder for at passe til en bestemt bruger. Nedenfor bliver det beskrevet, hvad man kan have brug for at tænke på, for at brugeren kan komme i gang med sin Handi 5.

#### 3.1 Indstillingstilstande

Handi 5 har to tilstande:

- *Brugertilstand*. Den tilstand Handi 5 er i når du bruger apps.
- *Indstillinger*. Den tilstand, hvor du indstiller, hvordan Handi 5 skal fungere, hvilke Handi-apps, der skal være tilgængelige, og hvordan disse skal fungere, samt hvilke andre apps, der skal være tilgængelige.

Hvor du kommer til indstillingstilstand beskrives i næste afsnit. Følgende indstillingsmenu vises:



Her kan man foretage indstillinger for Handi, se *Brugervejledning Handi 5* og funktionsbeskrivelserne for de respektive Handi-apps.

Man kan også komme til Androids indstillingsmenu og til *Play Butik*.

#### 3.2 Gå til indstillingstilstand

Man kan komme til indstillinger på to måder, hvilket beskrives her.

##### 3.2.1 Ikon på Startmenuen

I grundindstillingen findes en ikon for *Handi Indstillinger* i Startmenuen: . Ved at trykke på den kommer man til indstillinger.


Hvis brugeren ikke skal have adgang til *Indstillinger* er det en god idé at fjerne ikonet fra Startmenuen. Dette gøres ved at afkrydse ikonet i **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps**.



### 3.2.2 Knapkombinationen

Når man står i Startmenuen eller i en Handi-app kan man trykke en specifik *knapkombination* og komme til *Indstillinger*.

Følgende knapkombination gælder for de fleste Android-modeller. Der findes dog modeller, hvor knapkombinationen ikke fungerer, her skal man anvende ikonet i Startmenuen.

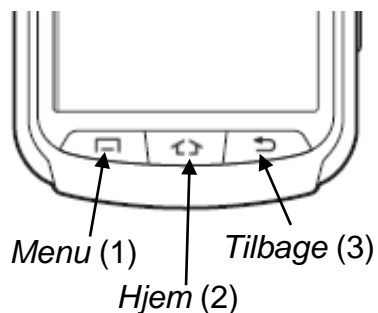

Tryk først kort på funktionsknappen *Menu* (1), herefter på funktionsknappen *Tilbage* (3), og gentager herefter, dvs. tryk *Menu-Tilbage-Menu-Tilbage*.

For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på funktionsknappen *Hjem* (2).

Knappernes placering kan variere mellem forskellige modeller.

### 3.3 Startskærm

*Hvordan skal startskærmen se ud? Skal Handi Startmenu eller telefonens egen startskærm bruges?*

***Det anbefales at bruge Handi Startmenu for at kunne udnytte Handi fuldt ud.***

#### 3.3.1 Vælg anden startskærm


Valget af startskærm gøres i forbindelse med at Handi installeres. Hvis du eller ønsker at ændre startskærm, skal du gøre følgende:

Gå till **Indstillinger|Startmenu|Nulstil Hjemknappen** og tryk på *Indstillinger* for *startskærm*. Siden nærmest til højre vises.

Bladre ned til knappen *Tøm standardindstillinger* og tryk på den.

Tryk på *Hjem*-knappen.

Vælg derefter den ønskede startskærm (Handi Startmenu) og tryk derefter på knappen *Alltid*.

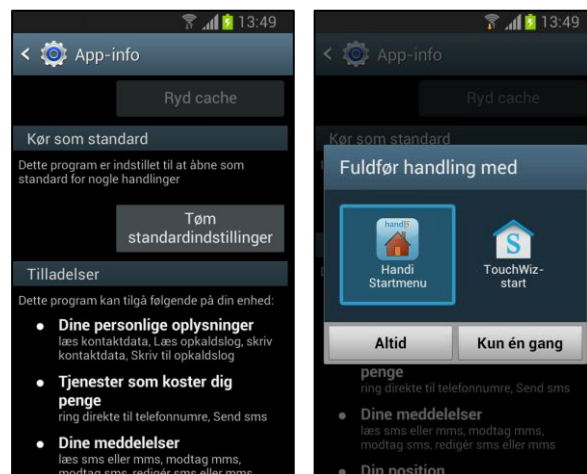



### 3.3.2 Tilpasse Handi Startmenu

Startmenuen kan have indstillingen *Standard*, *Handi Rudenet* eller *Handi Rækker*. Grundindstillingen er Handi Rudenet.

Startmenu med Handi-layout har mindre information, et renere udseende, og mulighed for talestøtte. Startmenuen kan vises med rækker eller rudenet.

Standard-layout ligner mere en almindelig smartphone, hvad angår layout og har nogle funktionelle forskelle i forhold til Handi-layout:

Statusfeltet (øverst) vises.

Ingen talestøtte

Enkelttryk for at start en app.

Eget baggrundsbillede kan vælges.

Favoritter. I rækken nederst lægger man de apps, man vil have tilgængelige.

*Handi Rudenet*



*Standard*



Du vælger startmenuens layout via **Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu** og baggrundsbillede via **Indstillinger|Startmenu|Vælg baggrundsbillede** eller *Hurtigindstillinger*. For mere information, se *Brugervejledning Handi 5*.

### 3.4 Telefonabonnement

*Hvilket telefonabonnement har brugeren?* For at kunne bruge en smartphone uhindret er fri surfing mere eller mindre et krav. Selv om man har kontantkort, kan man hos de fleste operatører købe en pulje med fri surfing. Fx. koster et års surfing på Telia ca. 500 kr.

For at have adgang til internettet (når man ikke har adgang til trådløst netværk, se nedenfor) skal mobildata aktiveres, se *Håndbogen for din telefonmodel*.

For at kunne sende og modtage sms og mms skal meddelelsesserveren muligvis konfigureres. Dette sker automatisk hos de store operatører. Tag kontakt med din operatør, hvis du har brug for hjælp til at indstille tjenesten.

### 3.5 WiFi

*Har brugeren adgang til trådløst netværk, WiFi?*

Se *Håndbogen for din telefonmodel* hvordan man tilslutter sig trådløst netværk.

### 3.6 Google-konto

*Har brugeren en Google-konto, en Gmail-adresse?* Dette er et krav for at kunne downloade apps. Se *Håndbogen for din telefonmodel* hvordan man gør for at indstille sin Google-konto.

### 3.7 Apps

Hvilke apps skal brugeren have adgang til? Via **Indstillinger|Startmenuen|Ordne apps** afkrydser man hvilke Handi-apps og standardapps, der skal vises i Startmenuen. Man vælger også i hvilken rækkefølge, de skal vises. For mere information, se *Brugervejledning Handi 5*.

Behøver brugeren yderligere apps? I kapitel 4.1 *Download apps* får du mere at vide om hvordan man gør.

### 3.8 Kodebeskyt indstillinger


Skal brugeren have adgang til indstillingstilstand? Hvis ikke, er der så behov for at kodebeskytte indstillingstilstand?

Via **Indstillinger|System|Kodebeskyt indstillinger** kan du beskytte indstillingerne med en kode.

Det betyder at når du trykker *knækombinationen* vises siden til højre og du skal nu indtaste en angiven kode for at komme til Indstillinger.

Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne eller downloader apps fra Play Butik.

For mere information, se *Brugervejledning Handi 5*.

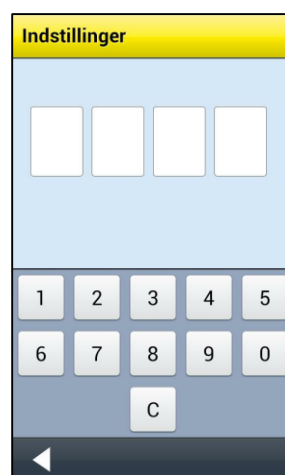

### 3.9 Talestøtte

Handi 5 har talestøtte, dvs. al tekst i Handi-apps kan læses op af en talesyntese.

Man kan vælge om man vil have talestøtte slået til, og i hvilke situationer man i så fald vil have talestøtte. Fx om teksten skal læses op mens man skriver eller kun når man trykker på *Oplæsnings*-knappen. Se **Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger**.

Du kan vælge mellem en mande- og en kvindestemme; Mette og Rasmus. Valg af oplæsningsstemme gøres via **Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme**.

Hvis stemmerne til talesyntesen ikke er downloadet under installationen, så kan de hentes via **Indstillinger|System|Talesyntese|Download stemmer**.

### 3.10 Billedarkiv


Med **Handi Xcover 2** leveres følgende billeder:

- **Handi-billeder.** Ca 160 stk. billeder som oprindeligt blev fremtaget af resursenheden AIR på Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under 2014 kompletteredes billedbasen ved hjælp af illustratør Andreas Högberg.
- **Rolltalk-billeder.** Ca 60 stk. billeder fra den billedbase der hører med til kommunikationshjælpe midlet Rolltalk.
- **Smileys** 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi.
- **Standardbilleder** 83 piktogram- og pcs-billeder.
- **Baggrunde.** 8 stk. forskellige baggrunde, som kan bruges i Startmenuen. (Man kan anvende valgfrit billede som baggrund).

Billederne er som udgangspunkt organiseret i kategorierne *Handi*, *Tøj*, *Badeværelse*, *Skole*, *Standardbilleder*, *Smileys*, *Personer* (tom) og *Baggrundsbilleder* (vises ikke i billedarkivet).

Billeder fra fx Sms og mail gemmes i mappen *Modtaget*. Mappen vises kun, hvis der ligger gemte billeder i den.

For at tilpasse billedarkivet anbefales det at bruge pc-programmet HandiTools eller webtjenesten Handi Web. Eller direkte i Handi via **Indstillinger|Billedarkiv**, se *Brugervejledning Handi 5*.

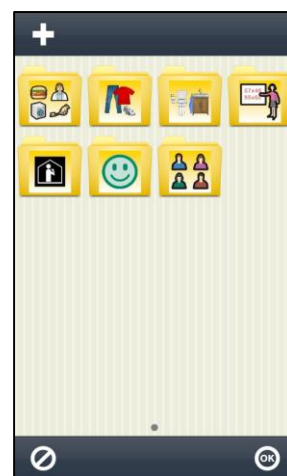

### 3.11 Installér HandiTools

Med pc-programmet HandiTools kan du overføre billeder og oprette skemaer. Det er også muligt at sikkerhedskopiere indholdet i Handi 5. Med HandiTools kan du også få logfiler fra Handi 5, hvilket er en fordel ved fejlsøgning.

Det er ikke nødvendigt at installere HandiTools for at anvende Handi 5, men det er en stor fordel for at kunne udnytte alle de muligheder, som HandiTools giver.

Installationsprogram og brugsanvisning til HandiTools findes på den USB-nøgle, der leveres med **Handi5 SW**.

### 3.12 Sikkerhed

Handi 5 bør sikkerhedskopieres med jævne mellemrum. Ved hjælp af PC-programmet HandiTools overfører man Handi 5 brugerdata og fotos til PC'en. Så kan man genskabe det meste, også selv om man skulle miste sin Handi 5.

Et andet sikkerhedsaspekt er at minimere risikoen for virus. Det gør man ved kun at downloade apps, man stoler på.

### 3.13 Importér Handi 4 brugerdata

*Har brugeren en Handi 4 og skal nu til at skifte til Handi 5?*

Denne instruktion beskriver, hvordan man overfører brugerdata fra en enhed med Handi4 til en enhed med Handi5. Overførslen forudsætter en computer med HandiTools installeret.

#### 1. Nedgrader Handi5-enheden, VIGTIGT!

- a) Gå til **Indstillinger|System|Om Handi** for at kontrollere softwareversion. Hvis softwareversionen er >5.3.2.4 skal programmet nedgraderes, følg instruktionen nedenfor.
- b) Afinstaller Handi. *Hvis man ikke laver dette trin vil Handi krasche i trin d).*
- c) Start en webbrowser på enheden og indtast [www.handitek.se/import](http://www.handitek.se/import).
- d) Hent og installer Handi v5.3.2.4.
- e) Konfigurer som "Ny bruger".

#### 2. Ta backup på Handi4-enheden

- a) Gå til **Indstillinger|System|Backup** og kørs backup.

#### 3. Kør HandiTools med Handi4-enheden

- a) Tilslut Handi4-enheden til computeren.
- b) Start HandiTools.
- c) Gå til **Filer**-menuen og vælg **Sikkerhedskopiering**. Følg instruktionene i HandiTools.
- d) Afslut HandiTools.
- e) Kobl Handi4-enheden fra.

#### 4. Kør HandiTools med Handi5-enheden

- a) Tilslut Handi5-enheden til computeren.
- b) Start HandiTools.
- c) Gå til **Filer**-menuen og vælg **Importer Handi4 brugerdata**. Følg instruktionerne i HandiTools.
- d) Kobl Handi5-enheden fra.

#### 5. Importer Handi4-data i Handi5-enheden

- a) Gå til **Indstillinger|System|Importer Handi4-data**.
- b) Tryk på *Start import* og vent mens importering sker. I visningen ser du hvilke data som bliver overført.

#### 6. Opdater til nyeste Handi5-version (hvis nedgradering er lavet)

- a) Sørg for at enheden har adgang til Internet.
- b) Gå til **Indstillinger|System|Om Handi** og tryk på *Søg opdatering*. Hent og installer den nyeste version.

### **3.14 Kopiere kontakter til Handi**

Fordelen ved at anvende Handi-kontakter er man kan gruppere og sortere sine kontakter. Hvis man ikke har behov for det, kan man undlade at anvende Handi-funktionen Kontakter.

Gå til **Indstillinger|Kontakter|Kopier kontakter**. En guide startes:


1. Vælg den konto hvor kontakterne skal kopieres fra (SIM-kort).
2. Marker de kontakter som skal kopieres. Tryk på *Næste* når du er klar.
3. Vælg den konto som kontakterne skal kopieres til (Handi) og tryk på *OK*.

Nu er kontakterne fra SIM-kortet overført til Handi-kontakter og man kan fx sortere dem i grupper, tilføje billede og information, se *brugervejledning Kontakter*.

Hvis du har installeret H5 SW på en enhed, der allerede er i brug, er det sandsynligt, at kontakterne er gemt under Enhed eller Google-konto. Vælg da at der skal kopieres fra den konto til Handi for at bruge Handi-funktionen Kontakter.

## 4. Om apps

Apps, der er en forkortelse af "applikationer", er de programmer, der er installeret i telefonen. Man kan skelne mellem følgende apps i Handi 5:

- **Handi-apps.** De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Fx Kalender, Kontakter, Skema, Kriseplan, Hurtigindstillinger etc. De har alle den samme lille h5-logo nederst til højre på ikonet: 
- **Standard-apps.** De apps, der indgår i Android og er lidt forskellige på de forskellige telefonmodeller. Fx. Telefon, Meddelelser, Lommeregner, Maps og E-mail.
- **Tredjeparts-apps.** Apps, der er downloadet via *Play Butik*. Fx. rejseplanen, lydbogslæser, nyheder, Spotify og Facebook.

Handi-apps beskrives på en overskuelig måde i *Brugervejledning Handi 5*. For en mere detaljeret beskrivelse, se Brugervejledning for de forskellige Handi-apps. Funktionsbeskrivelserne findes på den USB-nøgle, der blev leveret sammen med **Handi5 SW**, men kan også downloades fra Abilias hjemmeside, [www.abilia.dk](http://www.abilia.dk).

Der er en generel beskrivelse af download af apps sidst i dette kapitel.

### 4.1 Download apps

Hvis man vil have adgang til andre apps, end Handi-apps og standard-apps skal man downloade dem via *Play Butik*. Det kan være apps som Spotify, Facebook, rejseplanen, lydbogslæser, etc.

For at komme til Play Butik går du til Indstillinger og vælger *Play Butik* i indstillingsmenuen. (Eller via Startmenuen, hvis den er indstillet til det).

For at man kan downloade er det nødvendigt, at man har en Google-konto koblet til telefonen, se kapitel 3.6 *Google-konto*.

#### 4.1.1 Overvejelser før man downloader en app

Der er meget, man bør overveje, før man downloader en app, bl.a.

##### **Hvordan finder jeg den rigtige app i Play Butik?**

Brug relevante søgeord. Hvis man ønsker et bedre overblik, når man søger efter en app, kan man på en PC surfe på <https://play.google.com/store>.

Udbuddet af apps er næsten uendeligt i dag. For at finde apps, der er velegnede til personer med kognitive funktionsnedsættelser, kan man finde tips på f.eks. Hjælpemiddelinstitutets hjemmeside og på forskellige diskussionsfora.

##### **Koster app'en noget?**

Selv om der står, at app'en er gratis, kan der af og til støde udgifter til, såkaldte "in app purchases", hvor man tilbydes at betale for forskellige opgraderinger inde i app'en.



##### **Er app'en god og sikker?**


Læs anmeldelserne af app'en. Apps fra store firmaer er som regel sikre.

Disse aspekter vil ikke blive taget op i denne Brugervejledning.

## Sådan downloader man en app!

Nedenfor gives et eksempel på, hvordan man finder og downloader app'en "Vejret 5 dage":


1. Start Play Butik.
2. Tryk på knappen .
3. Skriv *Vejret 5 dage* i søgefeltet og tryk på  eller vælg ud af listen som vises for at starte søgningen.
4. Der vises en liste med søgeresultater. Tryk på den ønskede app.
5. Læs beskrivelse og anmeldelser om app'en, tryk herefter på *Installer*.
6. Information om hvilke bemyndigelser, app'en kræver, vises. Tryk på *Accepter*.
7. Vent, mens app'en downloades. Det kan tage lidt tid, hvis man er tilsluttet via mobildata.
8. Færdig. App'en *Vejret 5 dage* er nu installeret og findes sidst i Startmenuen. (Man kan ændre app'ens placering i Startmenuen, se *Brugervejledning Handi 5*).

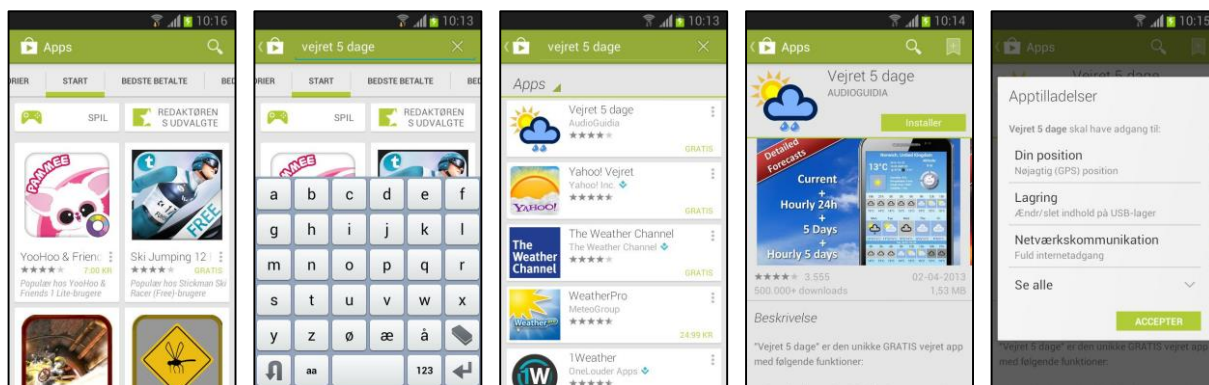

## 4.2 Fjern apps

Man bør tænke på ikke at have for mange apps installeret. Hvis man har downloadet flere forskellige apps for at prøve, hvilken der passer bedst, er det en god idé at fjerne de apps, som man ikke kommer til at bruge. Man har måske downloadet og prøvet forskellige vejrapps eller lydbogslæsere og fundet en, som man er tilfreds med. Så er det en god idé at fjerne de andre.

For at fjerne apps går man til den funktion i Android-indstillinger der håndterer de installerede apps. (På Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den *Programmanager*). Der vises en liste med downloadede apps. Man skal trykke på den app, der skal fjernes (*Ringdroid* i eksemplet nedenfor).

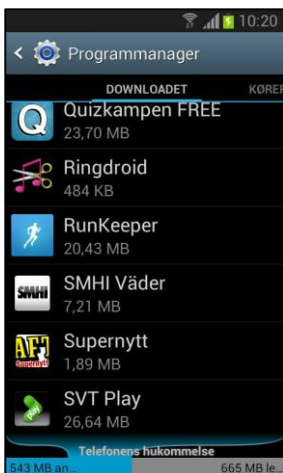

Tryk på knappen *Afinstaller* for at fjerne den valgte app.

### 4.2.1 Skjule apps

Man kan have apps i Handi 5 men vælge ikke at vise dem i Startmenuen. Dette kan fx. være en god idé, hvis man vil introducere en app senere.

I **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps** vælger man hvilke apps, der skal vises i Startmenuen og i hvilken rækkefølge. Se *Brugervejledning Handi 5*.



## 5. Afinstallation

En fuldstændig afinstallation består af tre momenter:

- Deaktiver licensen
- Afinstallere Handi 5
- Radere installationsfilerne.

Forneden beskrives hvordan de forskellige momenter skal udføres afhængig af fall.

### 5.1 Forskellige scenario for afinstallation

Forneden beskrives forskellige situationer når der kan være behov for at afinstallere **Handi5 SW** samt anbefalet løsning.

#### 5.1.1 Handi5 SW skal overflyttes til en anden telefon – installationen ligger på eksternt hukommelseskort og eksternt hukommelseskort kan bruges på den nye telefon.

1. Afinstaller Handi på den gamle telefon som beskrevet i 5.3 *Afinstaller Handi 5*.
2. Flyt hukommelseskortet fra den gamle til den nye telefon.
3. Installer på den nye telefon med start ved *Sæt hak ved "Ukendte kilder"* i installationsvejledningen.

#### 5.1.2 Handi5 SW skal overflyttes til en anden telefon uden at kunna flytte det eksterne hukommelseskort

1. Lav backup på Handi 5 via **Indstillinger|System|Backup**.
2. Lav en sikkerhedskopi på den gamle telefonens Handi 5-data via HandiTools.
3. Deaktiver licensen på den gamle telefon som beskrevet i 5.2 *Deaktiver licensen*.
4. Afinstaller Handi på den gamle telefon som beskrevet 5.3 *Afinstaller Handi 5* og 5.4 *Slet installationsfiler*.
5. Installer Handi 5 på den nye telefon som beskrevet i kapitel 2. *Installation*.
6. Genindstil Handi 5 med de brugerdata der er gemt med HandiTools sikkerhedskopiering.

#### 5.1.3 Telefonen er skadet eller tabt

1. Anskaf en ny telefon.
2. Kontakt Abilia og bede om at få deaktiveret licensen. Have værdibevis og licensnøgle tilgængeligt.
3. Installer Handi på den nye telefon som beskrevet kapitel 2. *Installation*.
4. Genindstil Handi 5 med de brugerdata som er gemt via HandiTools sikkerhedskopiering.

#### 5.1.4 Telefonen skal bruges af en ny bruger

1. Deaktiver licensen som beskrevet i 5.2 *Deaktiver licensen*.
2. Lav systemgenindstilling som beskrevet i *Håndbogen for din telefonmodel*.
3. Installer Handi 5 som beskrevet i kapitel 2. *Installation*.

### 5.1.5 Handi5 SW skal bruges af en anden bruger på en anden telefon

1. Deaktiver licensen på den nuværende brugers telefon som beskrevet i 5.2 *Deaktiver licensen*.
2. Afinstaller Handi på den nuværende brugers telefon enligt 5.3 *Afinstaller Handi 5* og 5.4 *Slet installationsfiler*.
3. Installer på den nye brugerens telefon som beskrevet i kapitel 2. *Installation*.

### 5.1.6 Demolicens skal laves om til skarp licens

1. Deaktiver demolicensen som beskrevet i 5.2 *Deaktiver licensen*.
2. Aktiver licensen.

## 5.2 Deaktiver licensen

**Her kræves internettilslutning.**

Gå til **Indstillinger|System|Licenshåndtering** og tryk på knappen *Deaktiver licens*. Bekræft at licensen skal deaktiveres.

Tryk på *Åbn Indstillinger* for at komme til Android-indstillingerne.



## 5.3 Afinstaller Handi 5

Gå til den funktion i Android-indstillingerne der håndterer de installerede apps. (På Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den *Programmanager*.)

Tryk på Handi og vælg *Afinstallér*. Bekræft at Handi skal afinstalleres.




## 5.4 Slet installationsfiler

Hvis der findes en Stifinder kan filerne raderes derfra (se kapitel 2.1.3.1 *Alternativ 1: Start Handi.apk via Stifinder*).

Ellers kan filerne raderes ved at tilslutte telefonen til en computer.

Gå til den hukommelse hvor installationsfilerne for **Handi5 SW** er gemt. Slet *Handi.apk* og mappen *Handi*.

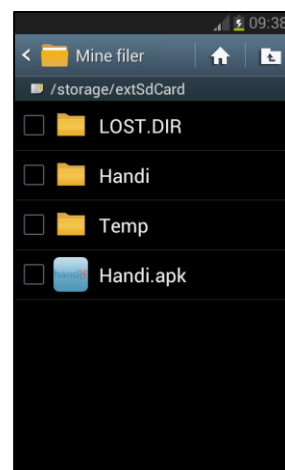

## 6. Tekniske data

### 6.1 Brugermiljø

**Handi5 SW** må kun bruges i det miljø som angives i for valgt telefon i *Håndbogen for din telefonmodel*.

### 6.2 Medfølgende artikler

Art.nr	Betegnelse	Beskrivelse	Antal
	Handi5 SW USB-nøgle	USB-nøgle med installationsfiler for Handi5 SW.	1 stk
	Handi USB-nøgle	USB-nøgle med HandiTools og dokumentation	1 stk
	Brugervejledninger	Dette dokument samt Brugervejledning Handi 5, Funktionsvejledning Kalender	3 stk

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden  
Phone +45 70 22 98 08 | [info@abilia.dk](mailto:info@abilia.dk) | [www.abilia.dk](http://www.abilia.dk)